

ХИРУРГИЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ



ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ И МИКРОХИРУРГИЯ

MUND-, KIEFER- UND MIKROCHIRURGIE

ИМПЛАНТОЛОГИЯ


IMPLANTOLOGIE

carl
marlin
Solingen




FINEST DENTAL INSTRUMENTS


Роторасширители Mundsperrer

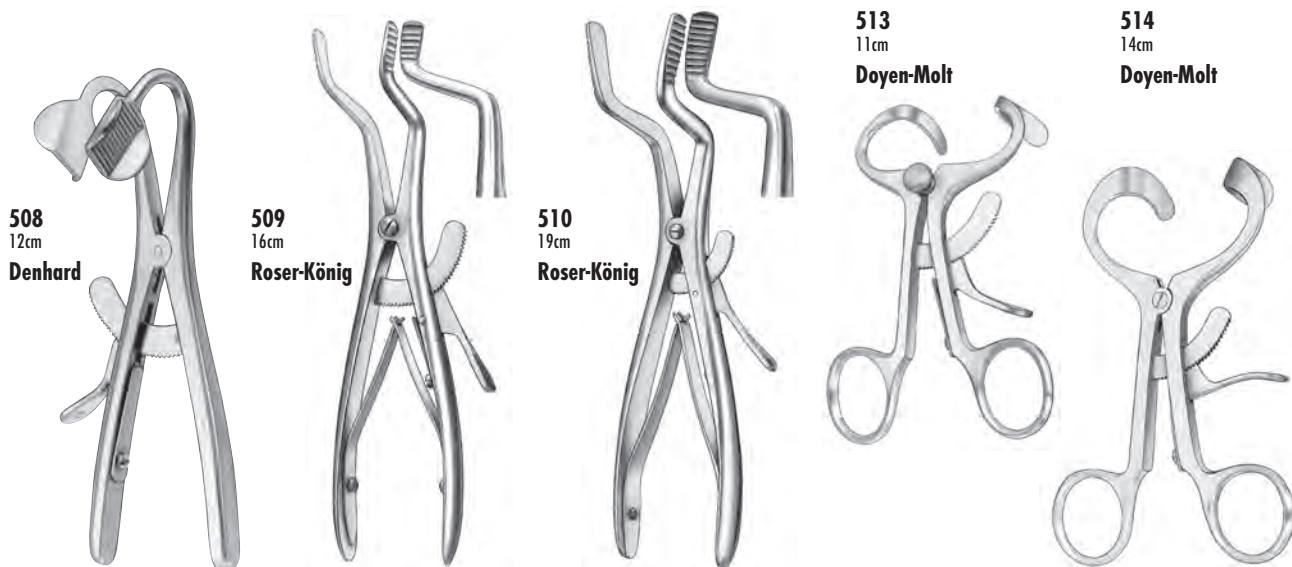


Протектор для пальцев/зажим для языка Fingerschützer/Zungenzange

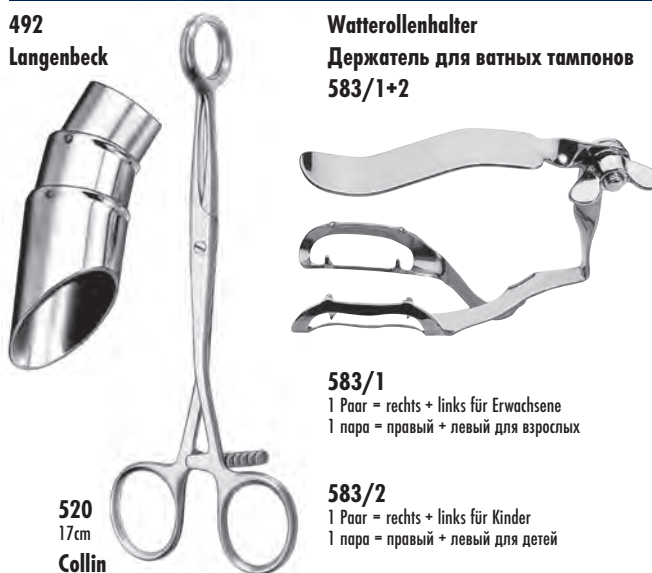

Пинцеты хирургические - Анатомическая форма Chirurgische Pinzetten - Anatomische From

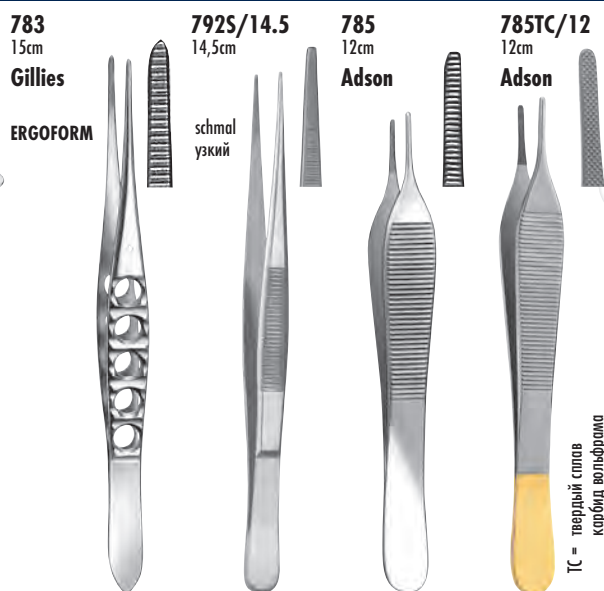

Пинцеты хирургические - Анатомическая форма Chirurgische Pinzetten - Anatomische From

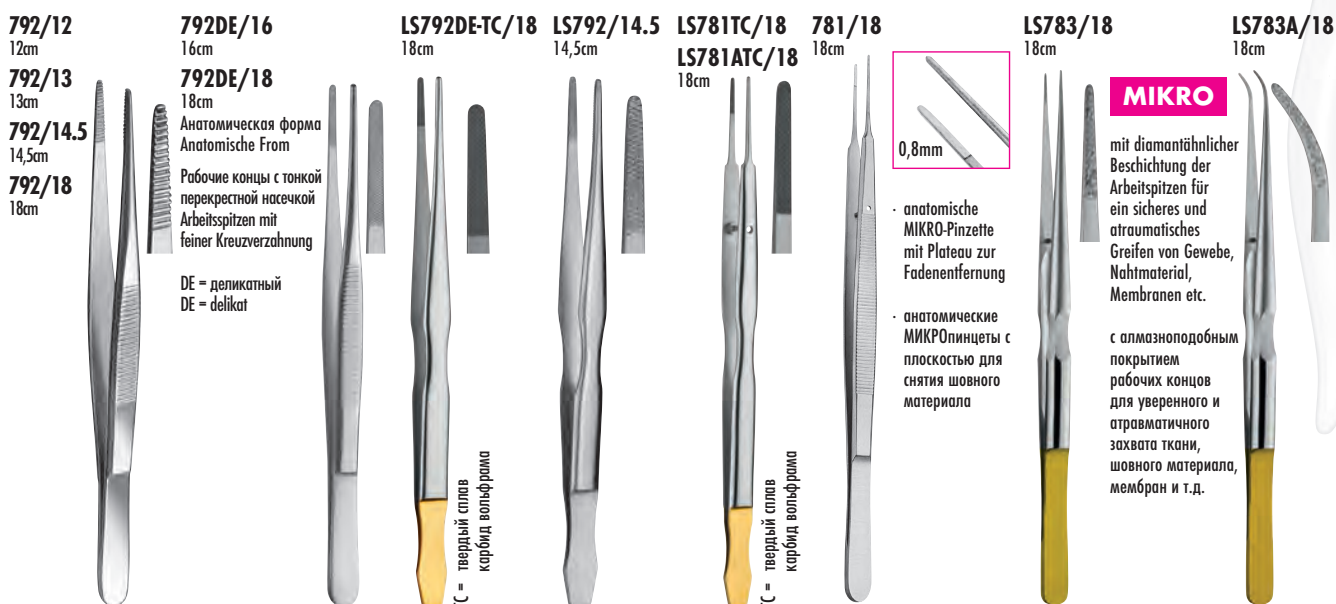

Пинцеты хирургические

Chirurgische Pinzetten

784
15cm

Gillies



786
12cm

Adson



786TC/12
12cm

Adson



TC = твердый сплав
карбид вольфрама

786DE/15
15cm


ADSON

Pinzette chirurgisch
sehr fein

Хирургический
пинцет
очень тонкий



789
15cm

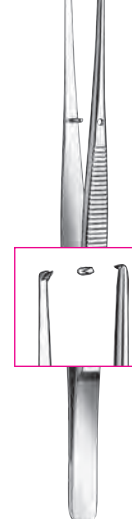

789A
15cm



sehr fein
очень тонкие

Пинцеты хирургические

Chirurgische Pinzetten

793/12 · 12cm
793/13 · 13cm
793/14.5 · 14,5cm
793/18 · 18cm



793DE/16
16cm

793DE/18
18cm



DE = delikat

Chirurgische Pinzette
delikat

Хирургический пинцет
изящный

LS793/14.5
15cm




795
15,5cm

Tjebbes



799
12,5cm

Semken

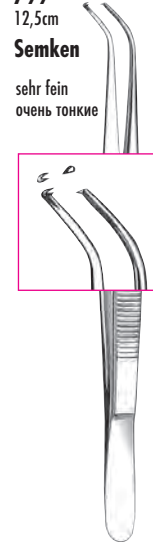

sehr fein
очень тонкие

796R
15cm



796L
15cm



Crane-Kaplan

Taschenmarkierungspinzette
Пинцет для маркировки
пародонт. карманов

Пинцеты хирургические

Chirurgische Pinzetten

LS798TC/16
15cm



TC = твердый сплав
карбид вольфрама

798
15cm



De Bakey



798 + 798A

Атравматические Пинцеты
Атравматичные пинцеты

- zum sicheren Halten von Schleimhautgewebe
- die feine Mikro-Zahnung verhindert eine Perforation des Gewebes
- для надежного удерживания мягкой ткани
- мелкие микрозубцы препятствуют перфорации ткани

797
15cm



Nahtpinzette
Шовный пинцет

Die Nahtpinzette No. 797 gibt Sicherheit bei chirurgischen Nähten. Sie gewährt einen sicheren Griff des Schleimhautlappens, dadurch entsteht kein Ausreißen oder Weggleiten mehr. Sie garantiert eine sichere Nahtführung und ist gleichzeitig Nähhilfe sowie als chirurgische und anatomische Pinzette verwendbar.
Durch die rahmenartige Fixierung des Schleimhautlappens erfolgt ein gezielter Einstich der Nadel. Schon während oder nach dem Durchgang der Nadel, kann die Pinzette aufgrund ihrer Öffnung störfrei entfernt werden. Die abgewinkelte Form gewährt eine günstige Stellung zum Nahtgebiet und dieses speziell im distalen Bereich.

Пинцет № 797 для шовного материала безопасен при наложении хирургических швов. Он позволяет надежно захватить лоскут слизистой ткани, без разрывов и соскальзывания. Он гарантирует уверенное ведение шва и служит помощником при его наложении - в качестве хирургического и анатомического пинцета.
За счет "рамочной" фиксации лоскута прокол слизистой ткани иглой осуществляется целенаправленно. Уже во время или после прохождения иглы пинцет можно легко удалить. Изогнутая форма обеспечивает удобный доступ к зоне наложения шва, особенно на отдаленных участках.

Пинцеты хирургические Chirurgische Pinzetten

MIKRO

MIKRO-Пинцет

- sehr feine 0,8mm schmale chirurgische Pinzetten mit Plateau hinter der MIKRO-Zahnung

MIKRO-пинцет

- очень тонкие (0,8мм) хирургические пинцеты с плоскостью за MIKROзубчиками



- zum sicheren und höchst atraumatischen Halten der Wundränder
- speziell geeignet für Arbeiten bei stärkerer Vergrößerung (OP-Mikroskop)
- для надежного и atraumatического удерживания краев раны
- особенно удобны при работе с большим увеличением (Операционный микроскоп)
- das gerundete Arbeitsende erleichtert die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen (z.B. lingualer oder Molarenbereich)
- скругленный рабочий конец облегчает работу на труднодоступных участках (напр., в лингвальной зоне или у моляров)

782/18
18cm



782A/18
18cm

sehr fein
очень тонкие



LS782/18
18cm



LS782A/18
18cm



787/18
18cm



787A/18
18cm

gebogen
изогнутые



Ножницы десневые Zahnfleischnscheren

SUPER CUT

SUPER-CUT-Scheren

- rasiermesserscharf durch Spezialschliff und hohe Stahlhärte
- eine Schneide mit MIKRO-Spezialzahnung - hält Schnitt auch bei Fäden -
- große Griffringe NEU
- ein Scherengriff ist zur Erkennung vergoldet



854SC

12cm

La Grange

864SC

13cm

Goldmann-Fox

805SC/12

12cm

gerade/прямые

807SC/12

12cm

gebogen/изогнутые

854SC
864SC
gezahnt
зубчатые



Ножницы SUPER-CUT

- лезвие очень острое за счет специальной шлифовки и стали высокой закалки
- лезвие со специальными MIKROзубчиками могут разрезать шовный материал
- НОВИНКА - большие ушки
- одна рукоятка позолочена для идентификации

4

Ножницы десневые Zahnfleischnscheren

800WC/12

12cm

gerade/прямые

802WC/12

12cm

gebogen/изогнутые

800/10.5

10,5cm

800/12

12cm

gerade/
прямые

802/10.5

10,5cm

802/12

12cm

gebogen/
изогнутые

801/10.5

10,5cm

gerade/
прямые

803/10.5

10,5cm

gebogen/
изогнутые



WC = твердый сплав
карбид вольфрама



Ножницы десневые Zahnfleischscheren

860
12cm

862
12cm

838
16cm
gerade/прямые

840
16cm
gebogen/изогнутые

840SC/16
16cm
KELLY
Zahnfleischschere gebogen
Ножницы для дёсен изогнутые

804
12cm
gerade/прямые

806
12cm
gebogen/изогнутые

804D
12cm

806D
12cm

gezahnt/зубчатые

Martin

Kelly

SUPER CUT

Ножницы десневые Zahnfleischscheren

LS800/13
13cm
gerade/прямые

LS802/13
13cm
gebogen/изогнутые

LS800TC/13
13cm
gerade/прямые

LS802TC/13
13cm
gebogen/изогнутые

LS854/13
13cm
LA GRANGE

ТС = твердый сплав карбид вольфрама

Ножницы десневые Zahnfleischscheren

817/14
14cm
gerade, stumpf
прямые, тупые

818/14
14cm
gebogen, stumpf
изогнутые, тупые

810
12cm
gerade, stumpf
прямые, тупые

812
12cm
gebogen, stumpf
изогнутые, тупые

814
11cm
gerade
прямые

816
11cm
gebogen
изогнутые

n. JOSEPH

Ножницы десневые Zahnfleischscheren



854, 864, 865, 857
gezahnt/зубчатые

864
13cm

Goldman-Fox




857
17cm

Dean




854
12cm

La Grange

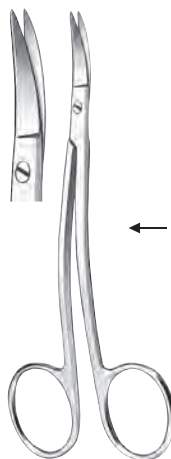

865
13cm

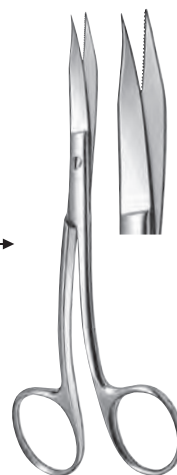

Ножницы для шовного материала Fadenscheren



Atraumatische Entfernung von Fäden
Атравматичное снятие швов

866
12cm

Spencer



868
11,5cm


867/13.5
13,5cm



808

11cm

kniegebogen/угловые

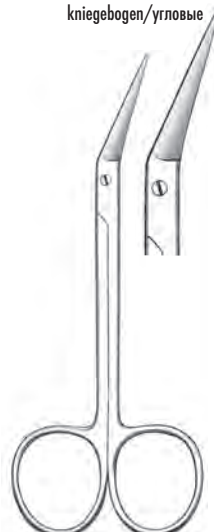

808 1/2

10,5cm

seitwärts gebogen/
с боковым изгибом



- rundes Arbeitsende zum atraumatischen Unterfassen des Fadens
- die leichte Kehlung sichert den Faden beim Durchtrennen und verhindert ein Abgleiten über das Arbeitsende hinaus
- die abgewinkelte Ausführung ermöglicht einen sehr guten Zugang in fast alle Bereiche der Mundhöhle

- скругленный рабочий конец для атравматичного прохождения под нить
- небольшая выемка удерживает нить при разрезе и предотвращает ее соскальзывание
- угловая форма дает очень хороший доступ, практически, во все зоны ротовой полости

Ножницы препарировочные Präparierscheren

835

14cm

gerade/

прямые




Metzenbaum

836

14cm

gebogen/

изогнутые

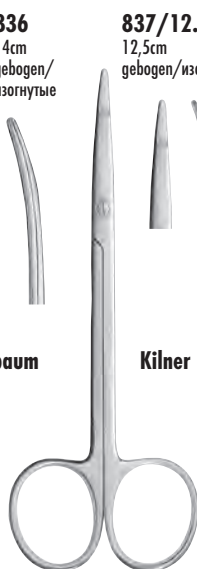

837/12.5

12,5cm

gebogen/изогнутые




Kilner

835DE-TC/15

14,5cm

METZENBAUM

gerade/прямые

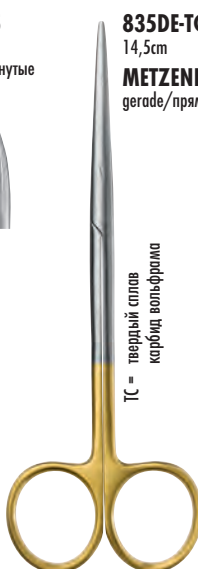


TC = твердый сплав
карбид вольфрама

836DE-TC/15

14,5cm

METZENBAUM

gebogen/изогнутые

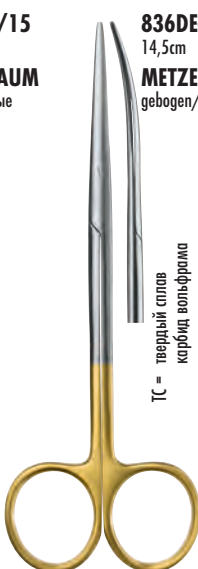

TC = твердый сплав
карбид вольфрама

841TC/15

18cm

TOENIES-ADSON

gebogen/изогнутые



SUPER CUT

845SC/18

18cm

METZENBAUM

gebogen/изогнутые



SUPER CUT

Ножницы десневые Zahnfleischscheren

Sehr feine und präzise MIKRO-Scheren speziell für Schleimhautchirurgie

Очень тонкие прецизионные МИКРОножницы для хирургии на слизистой

851
11cm

Westcott



852
15cm

Castroviejo



LS852
15cm

LS852/18
18cm

Castroviejo



LS852TC
15cm

Castroviejo



TC = твердый сплав карбид вольфрама



Ножницы десневые Zahnfleischscheren



853TC/15
15cm



TC = твердый сплав карбид вольфрама



853
15cm

Sehr feine und präzise MIKRO-Scheren speziell für Schleimhautchirurgie

Очень тонкие прецизионные МИКРОножницы для хирургии на слизистой



858/18
18cm
Gomel

Sehr feine Gewebescherer mit Rundgriff, in 18cm Länge und abgewinkelt. Die Abwinkelung ermöglicht eine sehr guten Zugang in distale, retro-molare oder palatinale Bereiche der Mundhöhle.

Очень изящные ножницы для мягких тканей, с округлой рукояткой длиной 18 см, угловые; угол обеспечивает очень хороший доступ к дистальным, ретро-молярным или палатинальным зонам ротовой полости



Ножницы десневые Zahnfleischscheren

MIKRO

855A/18
18cm



LS855A/18
18cm



855/18
18cm



855A + LS855A/18

MIKRO-Gewebescherer

- sehr feine MIKRO-Gewebescherer zum äußerst genauen Konturieren des Gingivalrandes und Papillenbereiches
- Kennzeichnung: mit vergoldeter Feder

МИКРОножницы для мягких тканей

- очень тонкие для исключительно точного контурирования десневого края и зоны сосочков
- маркировка: позолоченная пружина

Die Zähigkeit verschiedener Fadensorten führt zum Schärfeverlust Ihrer MIKRO-Scheren. Daher empfehlen wir, Fäden und Gewebe mit separaten Scheren (Fadenscherer, MIKRO-Gewebescherer) zu schneiden.

Вязкость различных сортов нитей приводит к притуплению МИКРОножниц. Поэтому мы рекомендуем отдельные ножницы для резки нитей и мягких тканей (ножницы для шовного материала и МИКРОножницы для мягких тканей)

855


MIKRO-Fadenscherer

- Kennzeichnung: mit schwarz-brüniert Feder

МИКРОножницы для шовного материала

- маркировка: чернёная пружина

Ножницы хирургические Chirurgische Scheren

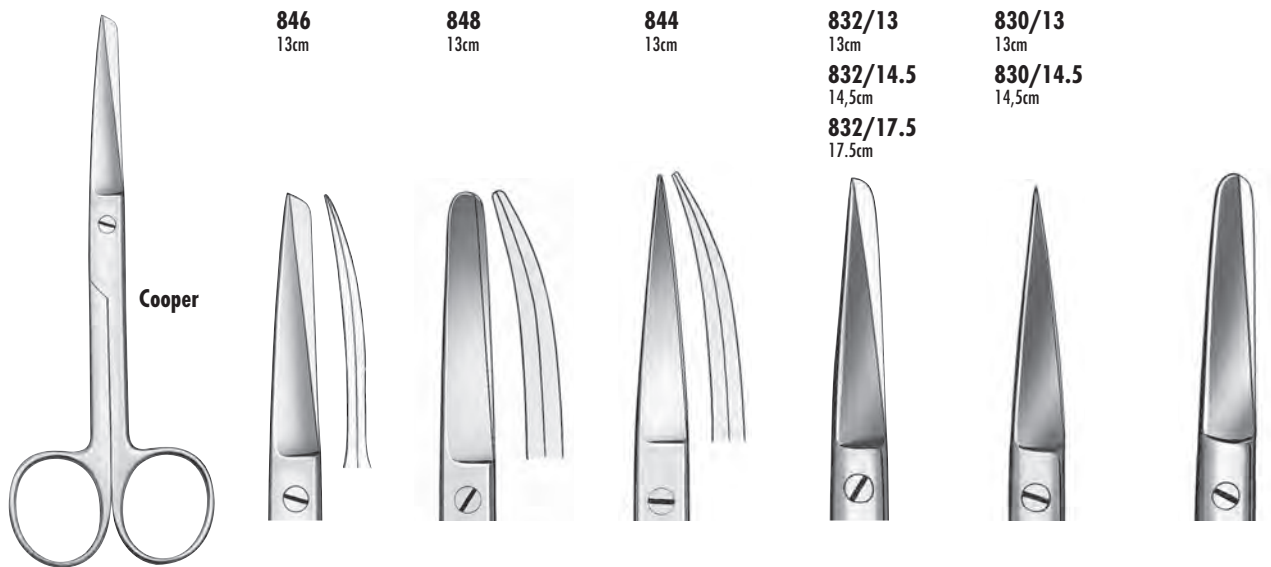

Щипцы для мягких тканей/ножницы хирургические Gewebezangen/Chirurgische Scheren

- Zangen zur Beseitigung von Gewebefasern und zum Modellieren des Gingivalrandes
- Щипцы для удаления тканевых волокон и для моделирования десневого края





Лезвия для скальпеля Skalpellklingen



Verpackt mit 100 Stück in Box
Упаковка: 100 шт.

beidseitig schneidend
двухсторонние лезвия

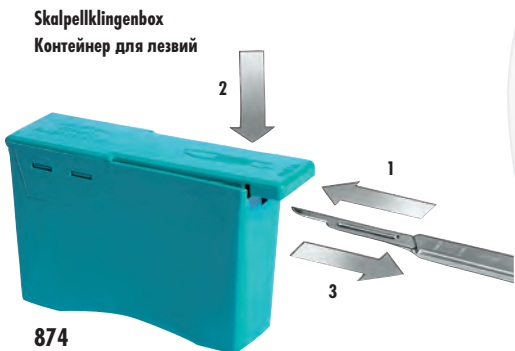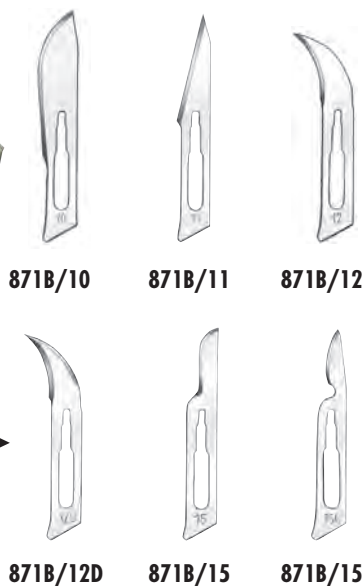

Лезвия для скальпеля Skalpellklingen



871MB/62
871MB/64
871MB/65
871MB/67
 Verpackt mit 10 Stück in Box
 Упаковка: 10 шт.

871MB/69
 Verpackt mit 1 Stück in Box
 Упаковка: 1 шт.

MIKRO

Skalpellklingen
 МИКРО-лезвия
 для скальпеля

834/13
 13cm
834/14
 14,5cm



Версии рукояток от Carl Martin Carl Martin Griffvarianten



Carl Martin Achtkant-Griff
 Восьмигранная рукоятка Carl Martin
 Ø 5,5mm



Carl Martin 8mm
 leichter, rostfreier Hohlgriff
 Легкая полая рукоятка из
 нержавеющей стали




Carl Martin 10mm
 LiquidSteel-Griff,
 ergonomische Formung, Hohlgriff
 Рукоятка LiquidSteel (жидкая сталь),
 полая, эргономичная форма

LIQUIDSTEEL

Рукоятки для скальпеля Skalpellgriffe

Modellbeschreibung - Seite 8
 Описание модели - стр. 8

für Klingen Nr. / для лезвий №
 10, 11, 12, 12D, 15, 15C

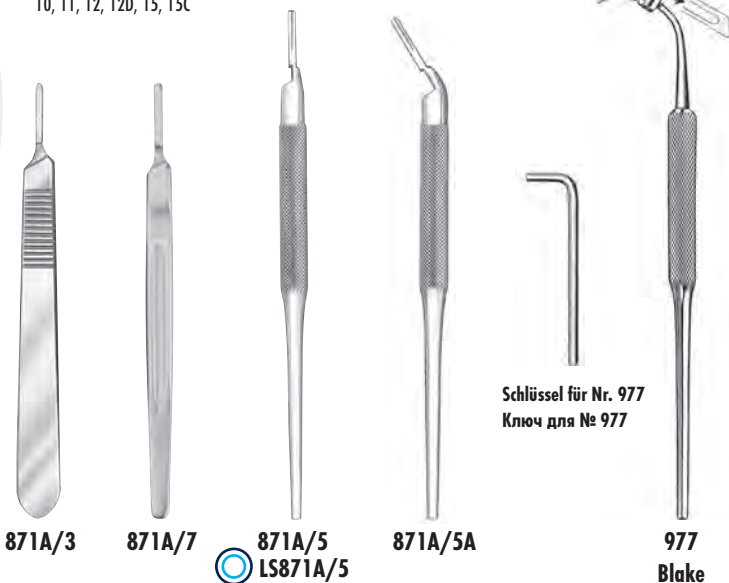

Schlüssel für Nr. 977
 Ключ для № 977

für Klingen Nr.
 для лезвий №
 18-25


MIKRO
 für Klingen Nr.
 для лезвий №
 65, 67, 69



ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ И МИКРОХИРУРГИЯ
 MUND-, KIEFER- UND MIKROCHIRURGIE

Одноразовые скальпели с пластиковой рукояткой/скальпели Einmal-Skalpelle m. Kunststoffgriff/Skalpelle

Verpackt mit 10 Stück in Box
Упаковка: 10 шт.

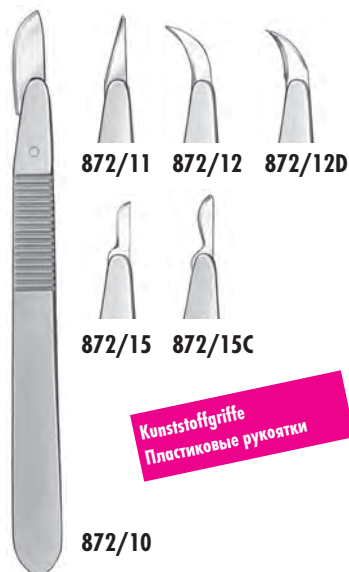


Kunststoffgriffe
Пластиковые рукоятки



Metallgriffe
Металлические рукоятки

Иглодержатели Nadelhalter

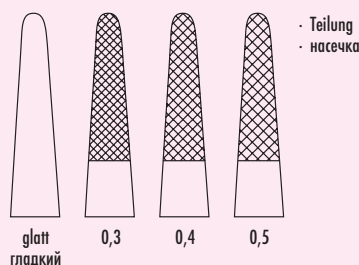

Die Struktur der Kreuzverzahnung (Teilung) in den Maulteilen der Carl Martin Hartmetall-Nadelhalter (TC), sind auf die indikationsbezogene Verwendung des Nahtmaterials abgestimmt. Hierzu erhalten Sie nachstehende Erklärung.


Teilung	Nahtmaterial
glatt	9/0 - 11/0
0,3 oder diamantiert	6/0 - 8/0
0,4	4/0 - 6/0
0,5	bis 3/0

Bitte verwenden Sie die Nadelhalter immer indikationsbezogen, da sonst die Gefahr der Verletzung der Nadel oder das Aufbiegen des Nadelhalters besteht.

Struktur der perkreuzten Nasecke (TC) in den Maulteilen der Carl Martin Hartmetall-Nadelhalter (TC) entspricht dem Anwendungsgebiet des Nahtmaterials nach den Indikationen. Die Erklärung ist unten angegeben.

Nasecke	Stichmaterial
glatt	9/0 - 11/0
0,3 oder mit diamantierten Enden	6/0 - 8/0
0,4	4/0 - 6/0
0,5	bis 3/0

Benutzen Sie die Nadelhalter entsprechend den Indikationen, da sonst die Gefahr der Beschädigung der Nadel oder das Biegen des Nadelhalters besteht.

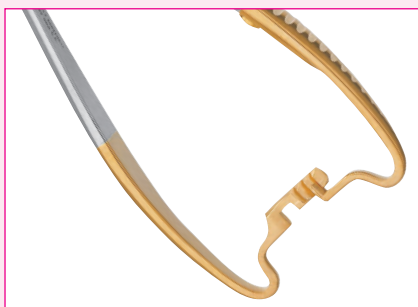

Als Kennzeichnung für die Verwendung von Hartmetalleinlagen an den Mäulern der Nadelhalter sind die Griffe verguldet. Die hochliegenden Innensperren verhindern ein Einklemmen der Latex-Handschuhe.

Die Verguldetung der Griffe bedeutet, dass die Arbeitsbereiche der Nadelhalter aus Hartmetall gefertigt sind. Die hochliegenden Innensperren verhindern das Einklemmen der Latex-Handschuhe.



TC = harter Legierung
Kohlenstoff-Wolfram

Vorteile von Hartmetalleinlagen:

- verschleißarm
- höhere Lebensdauer
- sichere Führung der Nadeln

Преимущества твердых сплавов:

- устойчивы к износу
- увеличивают срок эксплуатации
- уверенное ведение иглы


Иглодержатели Nadelhalter



Beschreibung – Seite 10 • Описание на стр. 10



ТС = твердый сплав
карбид вольфрама

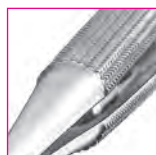

1159ТС/14
14cm
1159ТС/18
18cm



1169ТС/14
14cm
1169ТС/18
18cm

Barraquer



1152/14
14cm



1152ТС/14
14cm
1152ТС/18
18cm

Castroviejo



1153ТС/14
14cm
gebogen
изогнутый

Иглодержатели Nadelhalter



Beschreibung – Seite 10 • Описание на стр. 10

1171DI/18 0,3
18cm



MIKRO

1171/18
18cm



ab Fadenstärke
от размера нити
9/0 - 11/0

- glatt
- гладкие



- innen diamantiert
- внутренняя поверхность с алмазным напылением

1171DI/18

MIKRO-Nadelhalter

- sehr feiner Nadelhalter mit Diamantstaub-Beschichtung zum sicheren Halten und Führen auch kleinster Nadeln (z.B. bis Fadenstärke 8/0)
- durch die Beschichtung wird die Lebensdauer des Instrumentes wesentlich verlängert.
- Kennzeichnung: mit vergoldeter Feder.

МИКРОиглодержатель

- очень тонкий, с алмазным напылением для прочного удержания и ведения даже самых маленьких игл (напр., размера до 8/0)
- за счет напыления значительно увеличивается срок эксплуатации
- маркировка: позолоченная пружина

1171/18

MIKRO-Fadenhalter

- Instrument zum Fassen und Führen des Fadens mit glatter Maulfläche, wodurch der Faden nicht beschädigt wird
- Kennzeichnung: mit schwarz-brüniert Feder

МИКРОиглодержатель

- инструмент для захвата и ведения нити, с гладкими щечками, что предохраняет нить от повреждения
- маркировка: чернёная пружина

Иглодержатели Nadelhalter



Beschreibung – Seite 10 • Описание на стр. 10



ТС = твердый сплав
карбид вольфрама

LS1152ТС/14
14cm

LS1152ТС/16
16cm

LS1152ТС/18
18cm


Castroviejo

LiquidSTEEL

1153ТС/18
18cm



1170ТС/13
13cm

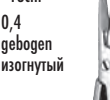

1170ТС/18
18cm



LS1170ТС/16
16cm



LS1170ТС/18
18cm



MIKRO-Nadelhalter

- sehr feine Nadelhalter für die MIKRO- und PARO-Chirurgie
- mit Rundgriff für ein ergonomisches günstiges Arbeiten
- Hartmetalleinlage TC

МИКРО-иглодержатели

- очень тонкие для МИКРО- и ПАРО-хирургии
- с округлой рукояткой - эргономичная работа
- твердосплавные вставки

Базовый набор для МИКРОхирургии MIKRO-Chirurgisches Basistray



Empfehlung für die Bestückung eines MIKRO-chirurgischen Basistrays:
Рекомендуемая комплектация базового набора для МИКРОхирургии:

LS871MH/6
MIKRO
Skalpellschalter
МИКРО-держатель для скальпеля

LS1152TC/18
Castroviejo
Nadelhalter
иглодержатель

LS855A/18
MIKRO Gewebeschere
МИКРОножницы для тканей

LS782/18
18cm
MIKRO-Pinzette
0,8mm, gerade
МИКРОпинцет 0,8 мм прямой

LS1032
Papillenheber
Элеватор для сосочков

LS1864/24G
Raspatorium
GLICKMANN
Распатор (элеатор периост.)

LS1867PR/3
Raspatorium
PRICHARD
Распатор (элеатор периост.)

LS781TC/18
Anat. Pinzette
1,3mm gerade
GERALD 18cm TC
Анатомический пинцет GERALD, 1,3 мм, прямой, 18 см TC

LS773C/2
Pinzette
Пинцет

LS485
Mundspiegel
griff
Гриф для внутритривового зеркала

LS1091/EXS3A
Sonde
Зонд

871MB/69
Skalpellschalter MIKRO
Лезвия для скальпеля



LS957-A
Inhalt/Содержимое:
je 1 Stück/no 1 шт. LS1152TC/18, LS855A/18, LS782/18, LS1864/24G, LS1032, LS871MH/6, LS1867PR/3, LS781TC/18, LS773C/2, LS485, LS1091/EXS3A, 471/4-STK, 871MB/69 + Поток 3029-L

Базовый набор для МИКРОхирургии MIKRO-Chirurgisches Basistray



Empfehlung für die Bestückung eines MIKRO-chirurgischen Basistrays:
Рекомендуемая комплектация базового набора для МИКРОхирургии:

855A/18
18cm
MIKRO Gewebeschere
МИКРОножницы для тканей

1171DI/18
18cm
MIKRO-Nadelhalter
МИКРОиглодержатель

782/18
18cm
MIKRO-Pinzette
0,8mm, gerade
МИКРОпинцет 0,8 мм прямой

1864/24G
Raspatorium
GLICKMANN
Распатор (элеатор периост.)

1031
Papillenheber
Элеватор для сосочков

871MH/6
MIKRO
Skalpellschalter
МИКРОдержатель для скальпеля



957
Inhalt/Содержимое:
je 1 Stück/no 1 шт. 3029-L, 855A/18, 1171DI/18, 782/18, 1864/24G, 1031, 871MH/6

Базовые наборы для хирургии Basistrays für die Chirurgie

871A/3
Skalpellschalter
Ручка для скальпеля

1890/2
42 x 10mm
Mundwinkelhalter
Щечный ретрактор
LANGENBECK

1804
16cm
Raspatorium
Распатор
WILLIGER

793/14.5
14,5cm
Chirurgische Pinzette
Пинцет хирургический

854
12cm
Zahnfleischschere
Ножницы десневые
LA GRANGE


1149TC/17
17cm
Nadelhalter
Иглодержатель
LICHTENBERG

1145/1
17cm
Scharfer Löffel
Кюрета
HEMINGWAY

1106A
17,5cm
Tampontopfer
Аппликатор
LUNITSCHKE


1960/2
18cm, Ø 3mm
Absaugkanüle
Слюноотсос

Osteotomie-Tray
Кассета для остеотомических инструментов

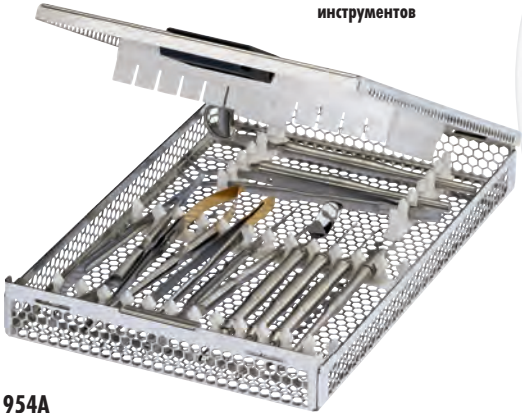

954A
Inhalt/Содержимое:
je 1 Stück/no 1 шт. 3029-L, 871A/3, 1890/2, 1804, 793/14.5, 854, 1149TC/17, 1145/1, 1106A, 1960/2

Базовые наборы для хирургии Basistrays für die Chirurgie

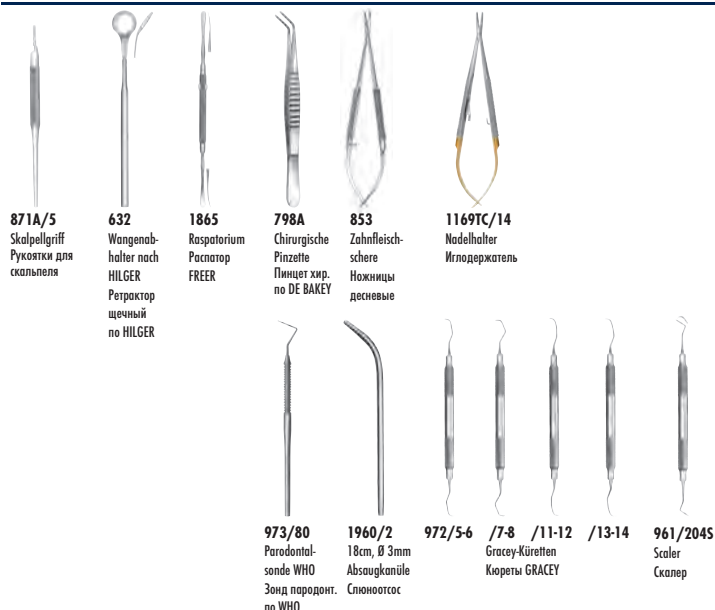

Tray für die Parodontal-Chirurgie
Кассета для пародонтальной хирургии




955A

Inhalt/Содержимое:

je 1 Stück/по 1 шт. 3029-L, 871A/5, 632, 1865,
798A, 853, 1169TC/14, 973/80, 1960/2,
972/5-6, 972/7-8, 972/11-12, 972/13-14,
961/2045

Базовые наборы для хирургии EDRANO Basistrays für die Chirurgie

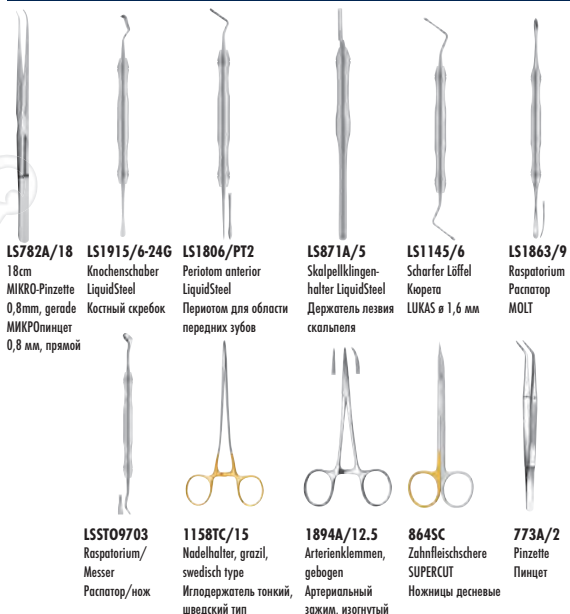


SET EDRANOV

Inhalt/Содержимое:

je 1 Stück/по 1 шт. 3029-L, 1158TC/15, 1894A/12.5, 864SC, 773A/2,
LS782A/18, LS871A/5, LS1806/PT2, LSST09703, LS1915/6-24G,
LS1145/6, LS1863/9

Базовые наборы для хирургии Basistrays für die Chirurgie

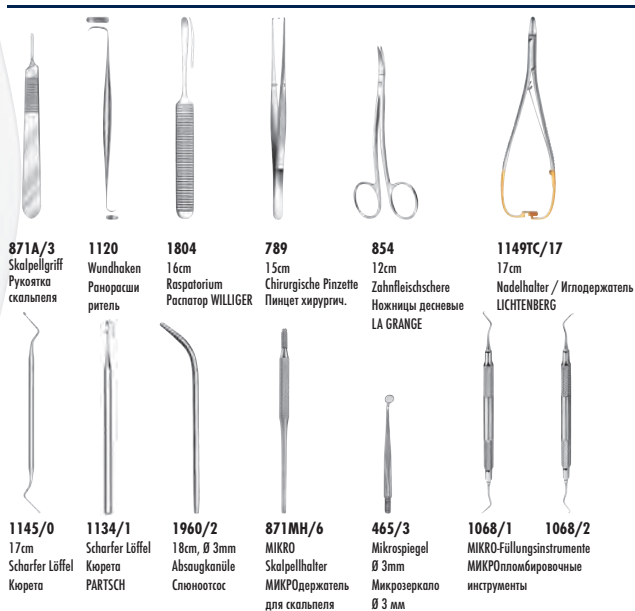

Chirurgisches Tray für die Wurzelspitzenresektion
Кассета хирургическая для резекции
верхушки корня



956A

Inhalt/Содержимое:

je 1 Stück/по 1 шт. 3029-L, 871A/3, 1120, 1804,
789, 854, 1149TC/17, 1145/0, 1134/1, 1960/2,
871MH/6, 465/3, 1068/1, 1068/2

Иглодержатели Nadelhalter



Beschreibung – Seite 10 • Описание на стр. 10

1155TC/15

15cm

1155TC/18


18cm

0,4



ТС = твердый сплав
карбид вольфрама

Шовный материал
4/0 - 6/0

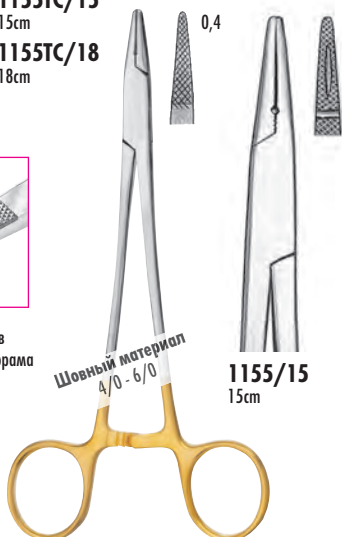

1155/15

15cm


1147TC/15

15cm

Ryder

0,4

Шовный материал
4/0 - 6/0

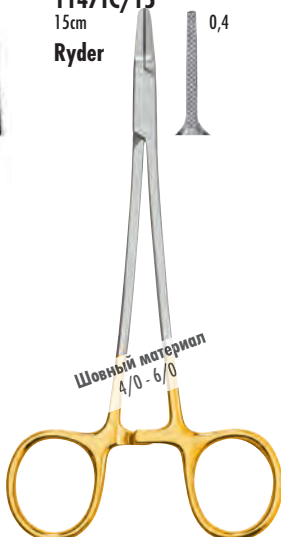


1158TC/15

15cm

0,4

Шовный материал
4/0 - 6/0

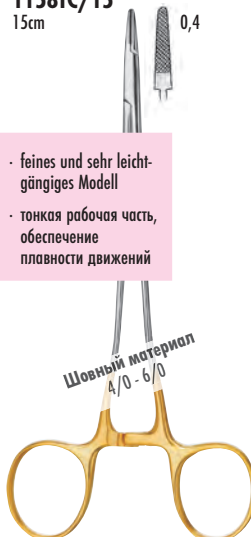


1156/16

16cm

1156/18

18cm

Mayo-Hegar

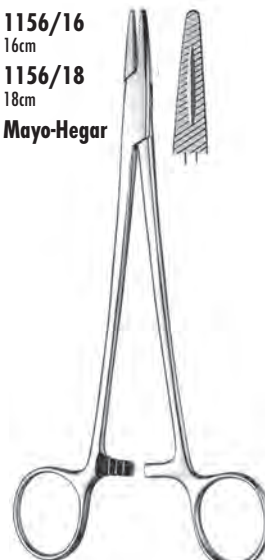

- feines und sehr leichtgängiges Modell
- тонкая рабочая часть, обеспечение плавности движений

Иглодержатели Nadelhalter



Beschreibung – Seite 10 • Описание на стр. 10

14



ТС = твердый сплав
карбид вольфрама

1160/14

14cm

1160/17

17cm

mit Kreuzverzahnung
с перекрестной насечкой



Mathieu

0,5

1161TC/14

14cm

0,5

1161TC/17

17cm

Шовный материал
до 3/0



Mathieu

0,5

1163TC/14

14cm

0,5

1163TC/17

17cm

Шовный материал
до 3/0



Иглодержатели Nadelhalter



Beschreibung – Seite 10 • Описание на стр. 10



ТС = твердый сплав
карбид вольфрама

1149TC/17

17cm

1149ATC/17

17cm

gebogen
изогнутый

speziell auch für retro-molare
Bereiche geeignet.

особенно удобен для работы в
ретромолярных зонах

Шовный материал
4/0 - 6/0



Lichtenberg

sehr leichtgängig
легкоподвижный

Olsen-Hegar

1150/14


14cm

1150TC/14

14cm

Иглодержатель с
ножницами

Шовный материал
до 3/0

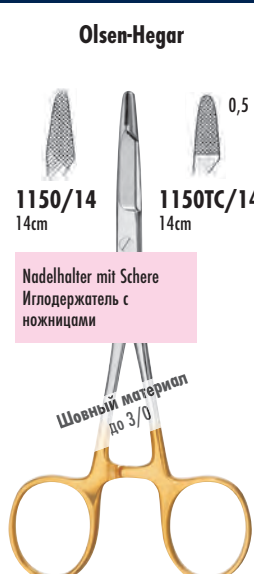

1167TC/15

15cm

Mini-Gillies

0,5



Иглодержатель с
ножницами

Ретракторы щечные Wangenhalter

1122
13cm

Farabeuf

26 x 10mm
23 x 10mm

28 x 12mm
30 x 12mm



1889
14,5cm



633
15,5cm

Cawood-Minnesota



Ретракторы губные Lippenhalter

630
15cm

Sternberg



631
18cm

Sternberg



Шпатель для языка Zungenspatel



634
19cm

Brünings

Роторасширитель Mundspanner



628/1
für Kinder
für детей

628/2
für Erwachsene
для взрослых

Mundspanner n. OHRINGER
Роторасширитель



628/...

für das gesamte Vestibulum des OK + UK

- vielseitige Einsatzmöglichkeiten (Prothetik, Chirurgie, Implantologie usw.)
- geringes Gewicht
- einfache Handhabung und patientenfreundlich
- glattes Design bietet beste Reinigungsmöglichkeiten
- keine Traumatisierung der Mundhöhle
- Abhalter kann während des Einsatzes am Patienten in der Mundhöhle verbleiben

ретрактор для щек и губ верхней и нижней челюсти, не подвергается коррозии

- разностороннее применение (протезирование, хирургия, имплантология и т.д.)
- малый вес
- удобен для врача и пациента
- гладкий, прекрасно очищается
- не травмирует ротовую полость
- в процессе лечения может оставаться во рту пациента.

Ретрактор вестибулярный Vestibulumabhalter

1882



1886



1880



Ретрактор щечный по Hilger/ штопфер/кюкеты

Modellbeschreibung - Seite 9

Описание модели - стр. 9

Wangenabhalter nach Hilger/
Tamponstopfer/Scharfe Löffel



632
18cm
Hilger

Abhalter ohne Griff
Ретрактор без рукоятки



632A
4,5cm
Hilger



17,5cm
Luniatschek

1106



1106A
LS1106A



1134/1
Partsch



1134/2
Partsch

Кюкеты Scharfe Löffel

Modellbeschreibung - Seite 9

Описание модели - стр. 9



1145/0
1148/0
LS1145/0



1145/1
1148/1
LS1145/1



1145/2
1148/2
LS1145/2




1145/3
1148/3
LS1145/3

17cm
Hemingway

LIQUIDSTEEL



LS1145/6

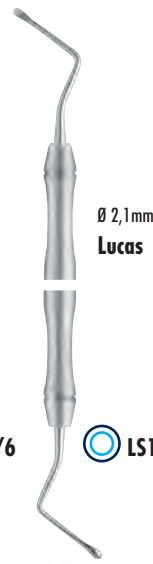

LS1145/7

Кюкеты Scharfe Löffel

Modellbeschreibung - Seite 9

Описание модели - стр. 9



1145/8
1148/8
LS1145/8




1145/9



1144/1



1144/2

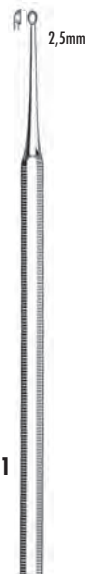

1126/1
14cm




1127/1
14cm
Kerpel




1127/2

Кюреты Scharfe Löffel

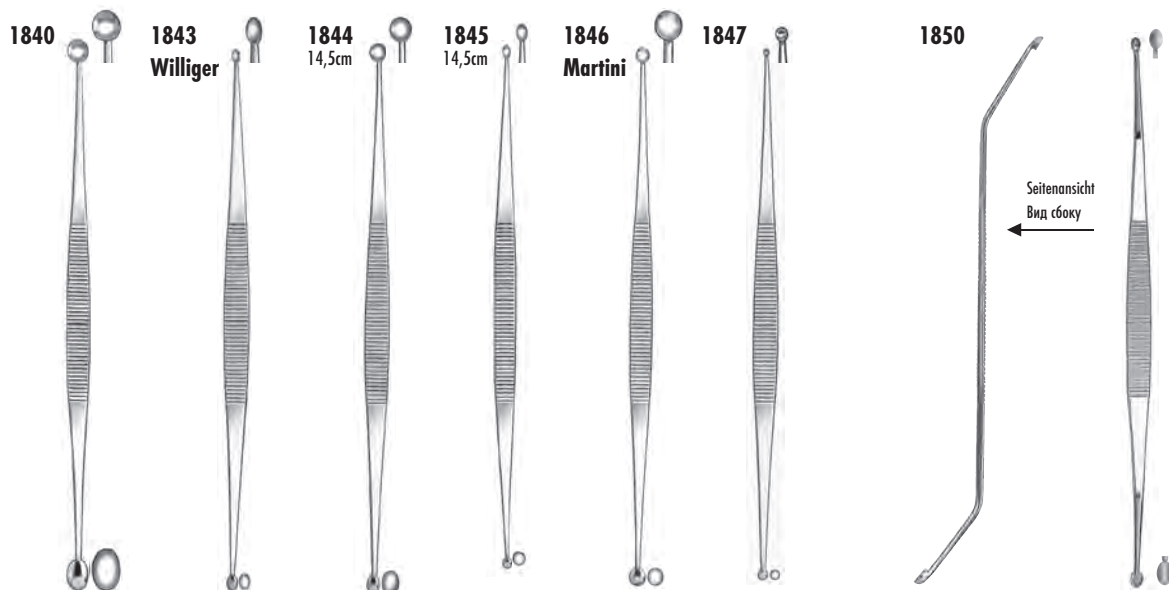


Иглодержатели Иглодержатели


Кусачки костные Hohlmeißelzangen

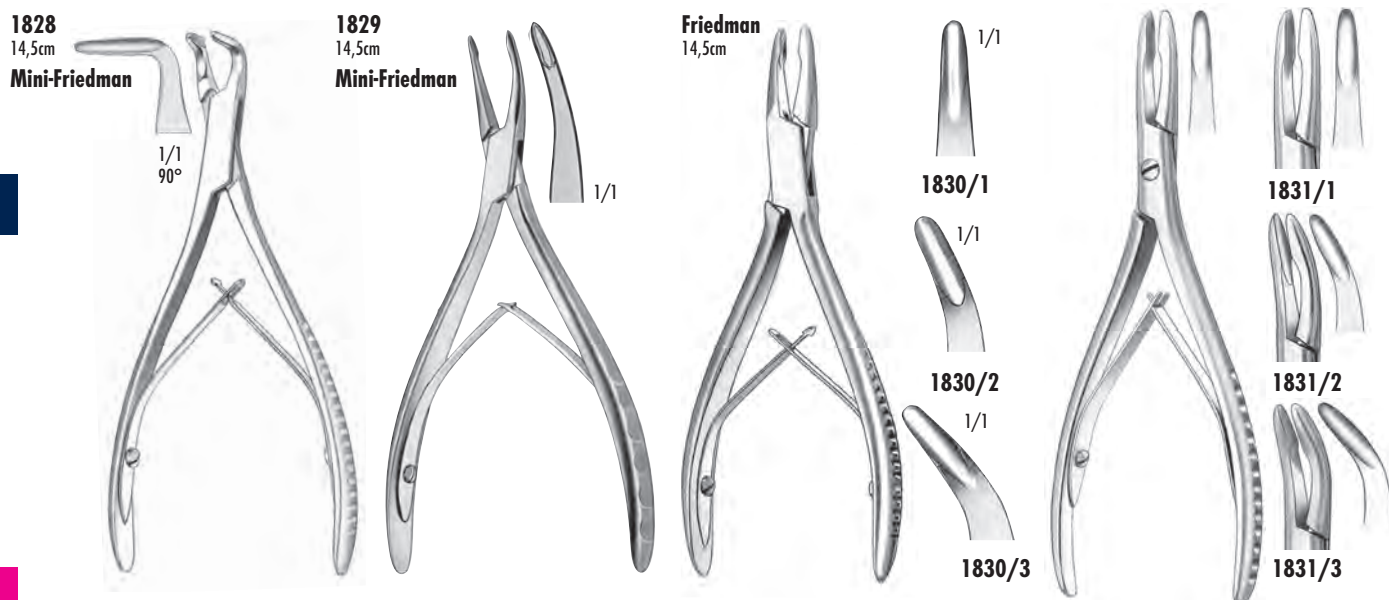

Кусачки костные Hohlmeißelzangen

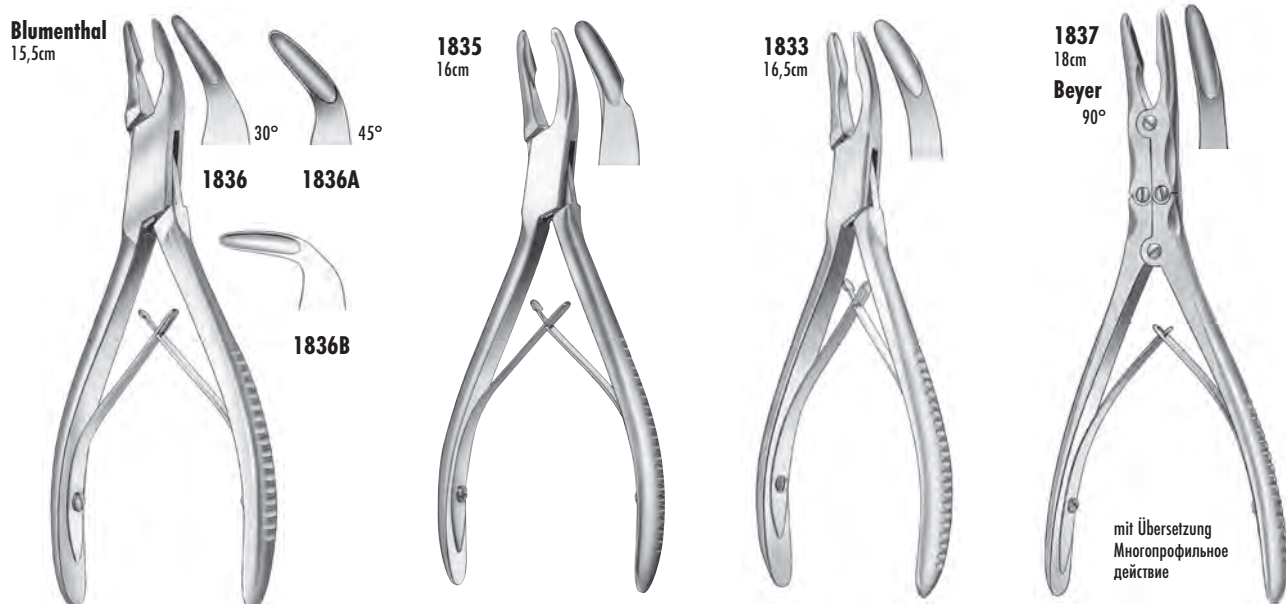


Распаторы Raspatorien

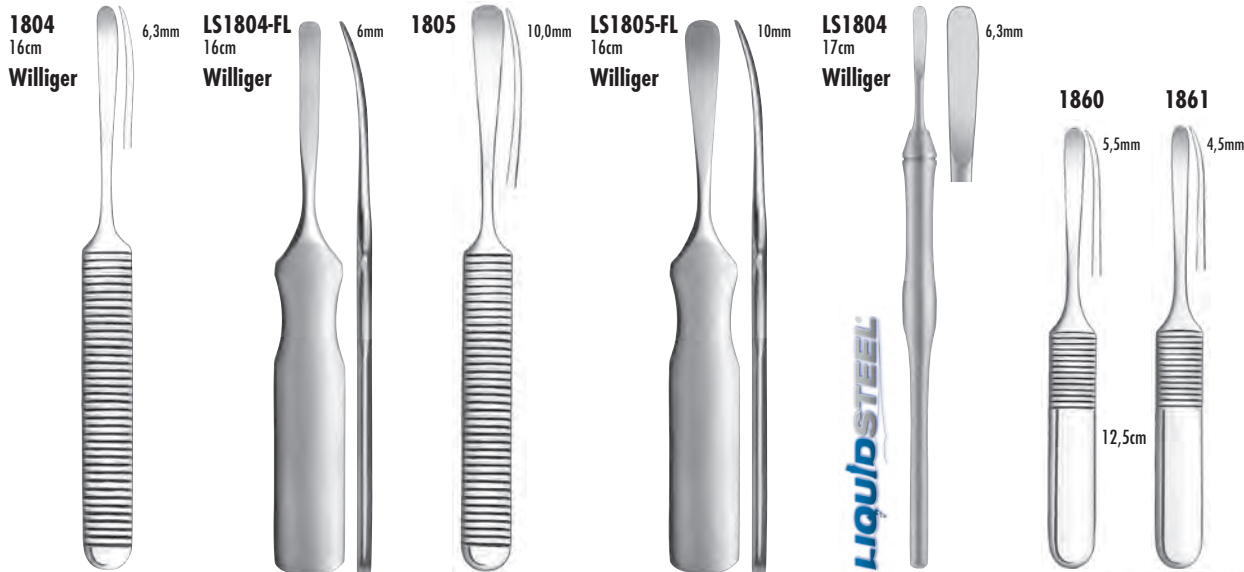

Распаторы Raspatorien


Modellbeschreibung – Seite 9
Описание модели – стр. 9

Zum Zurückhalten und Abhalten des Mucoperiostlappens.
Для отслоения и удерживания слизисто-надкостного лоскута

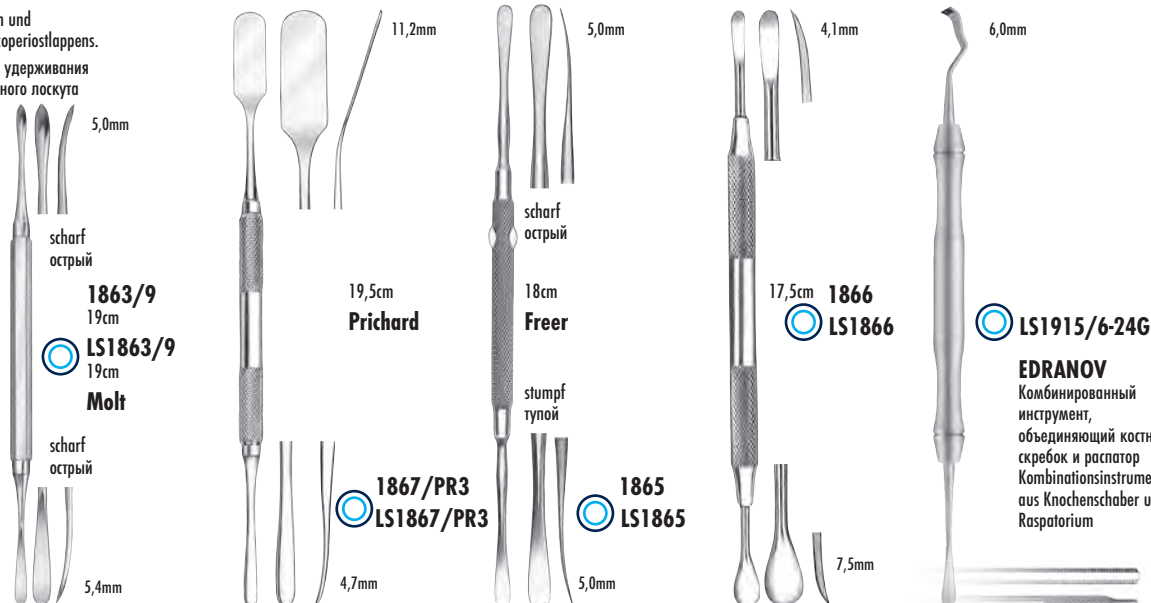

Распаторы и ретракторы десневые Raspatorien- und Gingiva Abhalter

Modellbeschreibung – Seite 9
Описание модели – стр. 9

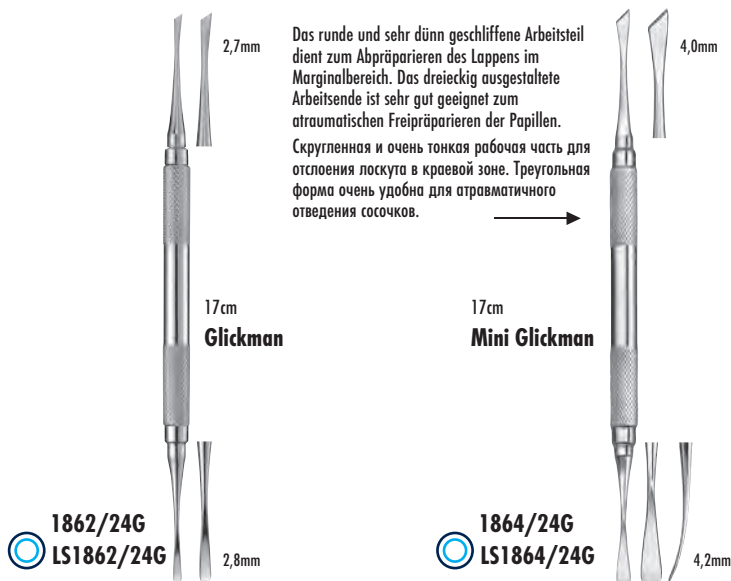

Das runde und sehr dünn geschliffene Arbeitsteil dient zum Abpräparieren des Lappens im Marginalbereich. Das dreieckig ausgestaltete Arbeitsteil ist sehr gut geeignet zum atraumatischen Freipräparieren der Papillen.
Скругленная и очень тонкая рабочая часть для отслоения лоскута в краевой зоне. Треугольная форма очень удобна для atraumatischen отведения сосочков.

Gingiva Abhalter

- für das schonende Abhalten der Gingiva während des Bohrens oder beim Einsetzen von zervikalen Kofferklemmern
- doppelendiges Arbeitsteil mit 2 unterschiedlichen Breiten für Front- und Seitenzahnbereich
- das konkave, stumpfe Arbeitsteil passt sich optimal der morphologischen Struktur des Zahnhalses bzw. der Gingiva an und erlaubt ein atraumatisches Arbeiten
- der leichte Hohlgriff erlaubt ein ergonomisches und ermüdungshemmendes Arbeiten

Ретрактор десневой


- для аккуратного отведения десны во время сверления или при установке прищечных кламмеров для коффердама
- двухсторонний инструмент - 2 варианта ширины: для передней и боковой зоны
- вогнутый тупой рабочий конец оптимален для морфологической структуры шейки зуба и для десны, обеспечивает atraumatische работу
- легкая полая рукоятка эргономична и не утомляет при работе



Распаторы Raspatorien

Modellbeschreibung – Seite 9

Описание модели – стр. 9

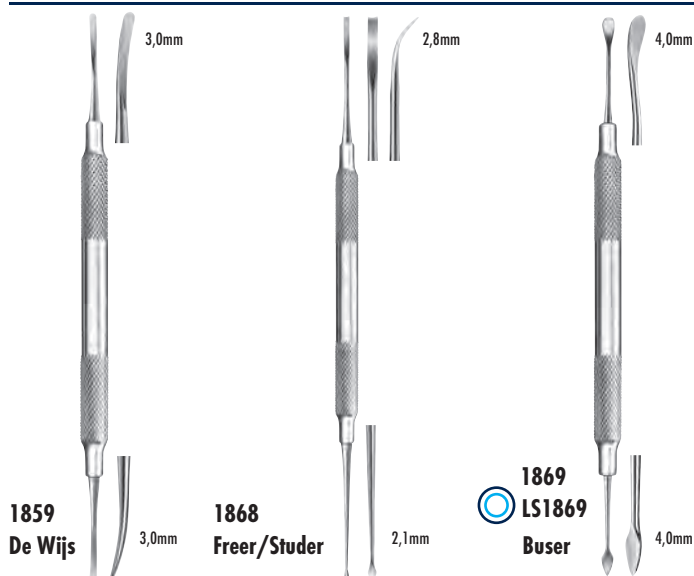

Spezielle Raspatorien für die parodontale- und mukogingivale Chirurgie
Специальные распаторы для пародонтальной и мукогингивальной хирургии

1869

Kombiniertes Raspatorium zum Lösen der Papillen, Gingivarand (lanzenförmiges Ende) und des Mucoperiostlappens (rundes Arbeitsende).

Комбинированный распатор для отделения сосочков, края десны (в форме ланцета) и мукопериостального лоскута

1868

Das herzförmige Arbeitsende dient zum schonenden Abpräparieren der Papillen und die andere Seite, mit seiner gebogenen, anatomischen Form, vor allem zum Abpräparieren der palatinalen Schleimhaut.

Сердцевидный рабочий конец - для щадящего отведения сосочков, а другой конец изогнутой анатомической формы - прежде всего для отслоения палатинальной слизистой.




1859

Die schlanke Form ermöglicht ein besonders schonungsvolles und atraumatisches Abpräparieren der Gingiva und des Schleimhautperiostlappens.


Изящная форма обеспечивает особенно бережное и атравматичное отслоение десны и слизисто-надкостного лоскута.

Распаторы Raspatorien

Зажимы для салфеток / зажимы артериальные Tuchklemme/Arterienklemmen

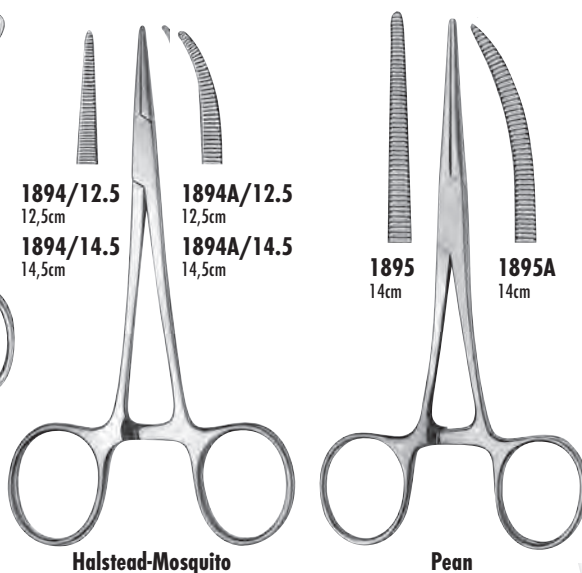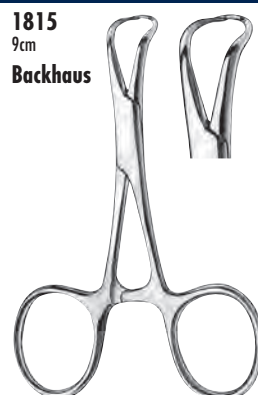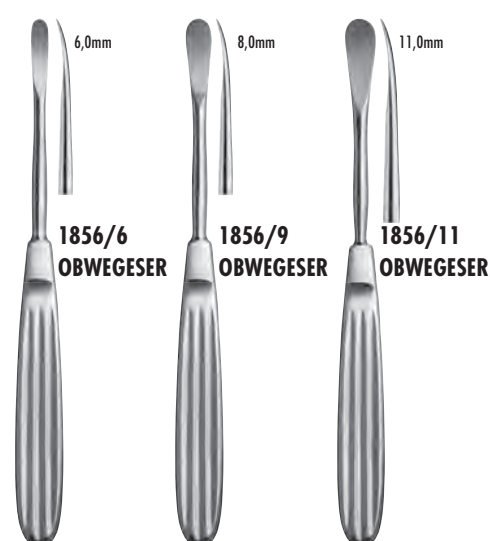


Зажимы артериальные/зажимы для наложения повязки Arterienklemmen/Kornzangen

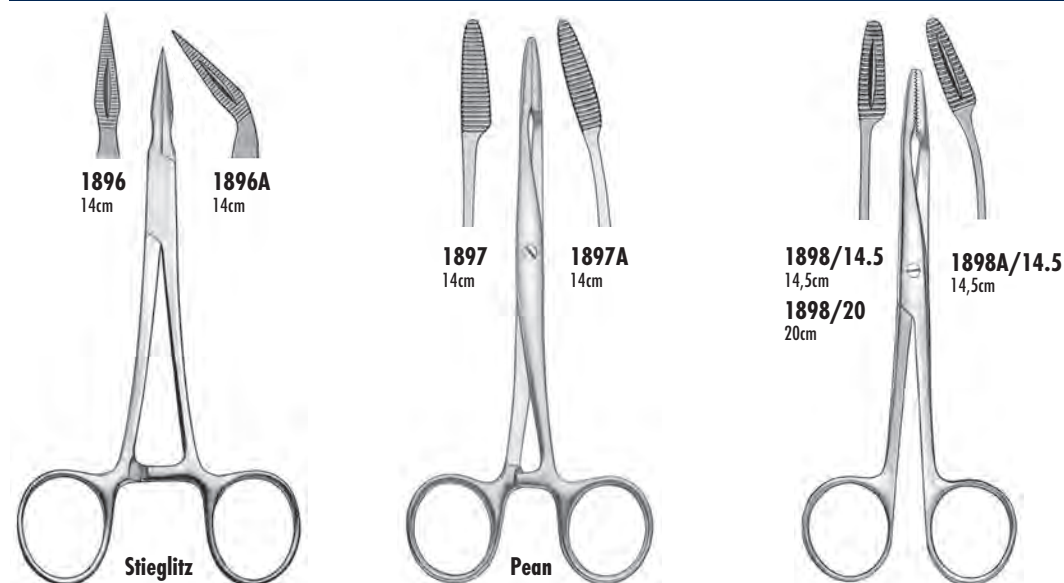


Зажимы артериальные хирургические/щипцы стерилизационные

Arterienklemme chirurgisch/Sterilisationszange

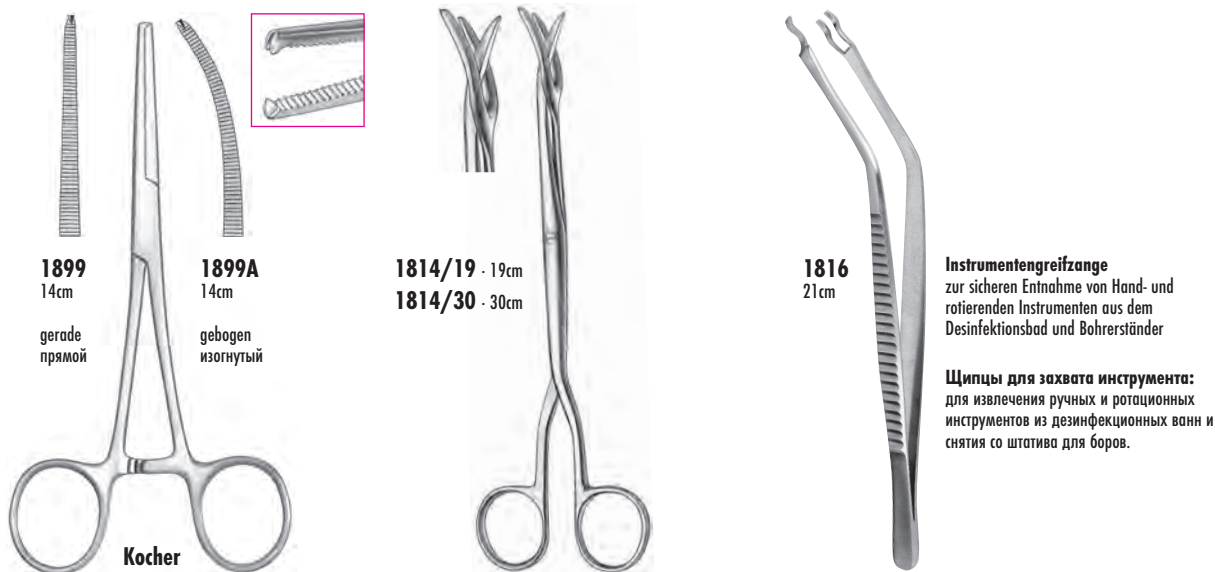


Зонды для синуса/распаторы (периотомы)

Kieferhöhlensonden/Periotome

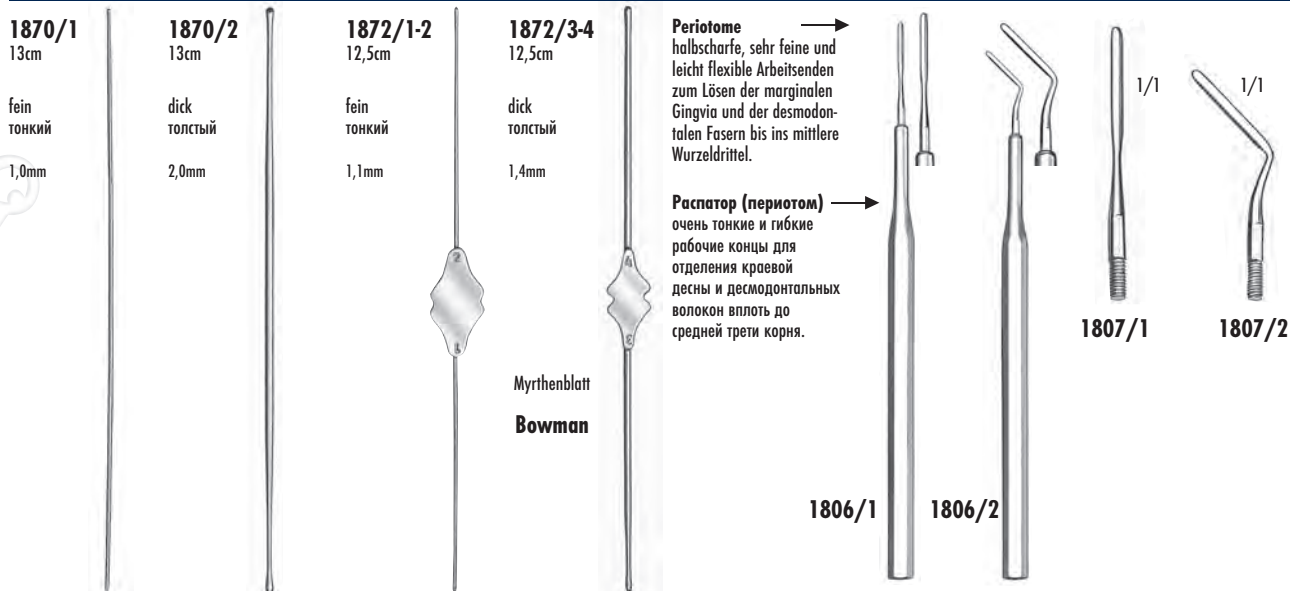

Распаторы (периотомы)

Periotome/Tunnelierungsinstrumente

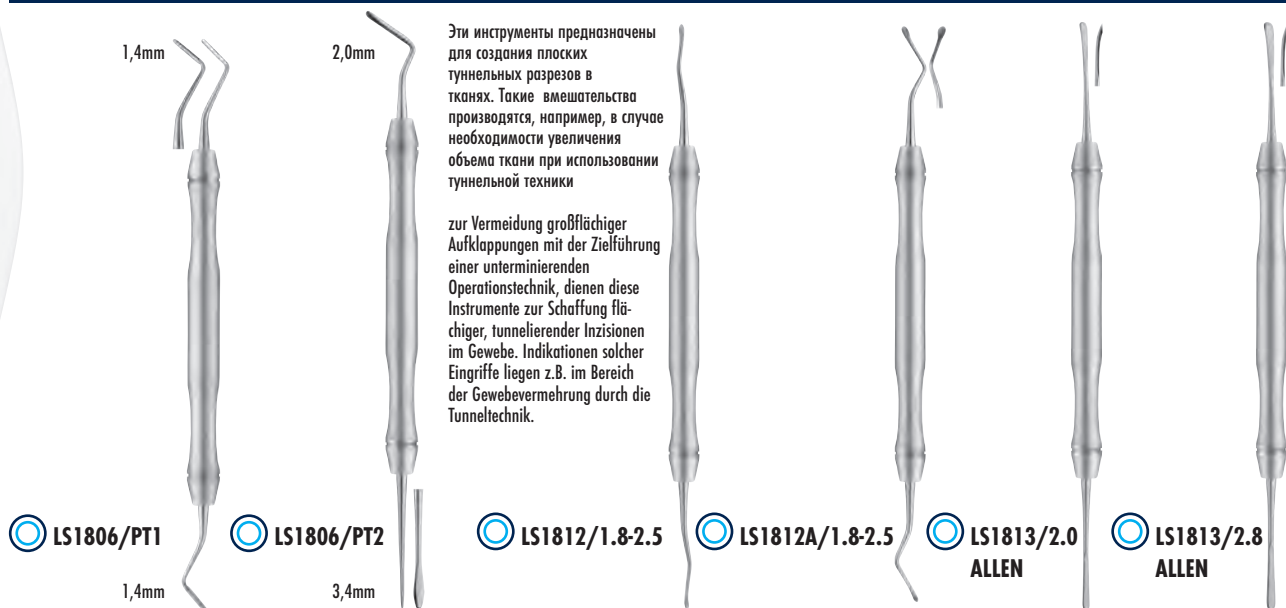

Молотки Hämmer

Hammer mit Bleifüllung
Молотки со свинцовым
наполнением



1241
18cm

Metallstiel
Металлическая
рукоятка

Hammer mit Bleifüllung
Молотки со свинцовым
наполнением



1790
24cm
Williger


Metallstiel
Металлическая
рукоятка



1795
25cm
Ombredanne

Hammer n. Ombredanne
Hammer für Knochenschlagdose,
Art.-Nr. 1923
rostfrei, Gewicht: 720g, autoklavierbar


Молоток по Ombredanne
для костной центрифуги,
№ артикула 1923
нерж.сталь, вес 720 гр.,
стерилизуется в автоклаве

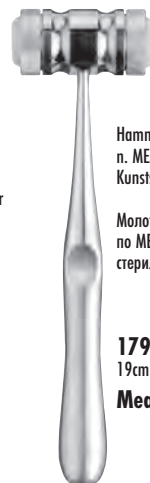

Hammer für implantologische Zwecke
n. MEAD mit sterilisierbaren (Autoklav)
Kunststoffbacken

Молоток для имплантологических целей
по MEAD с пластиковыми насадками,
стерилизуемыми в автоклаве

1796
19cm
Mead

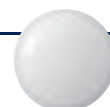

1796A

Ersatzbacken, 1 Paar
запасные насадки,
1 пара

Долота плоские и полые

Flach- und Hohlmeißel

Кровоостанавливающее
долото
Blutstillungsmeißel

1900/3
3mm

1900/4
4mm

12cm



1901/3
3mm

1901/4
4mm

12cm



1905/3
3mm

1905/4
4mm

14cm



1906/3
3mm

1906/4
4mm

14cm



1910/3
3mm

1910/4
4mm

16cm



1911/3
3mm

1911/4
4mm

16cm



Partsch

LS1907/3
3mm

LS1907/5
5mm


LS1907/7
7mm



Долота/микро-долота/распаторы/элеваторы для сосочков Meißel/Mikro-Meißel/Dissektor/Papillenheber



1912/1 1912/2
16cm
Ochsenbein

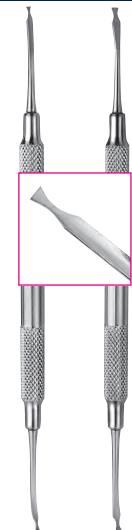

1913/1 1913/2
18cm
Ochsenbein

1913/1 + 2

MINI-Meißel OCHSENBEIN

Sehr delikate, doppelendige Knochenmeißel
in 2 Breiten (1913/1 = 1,8mm,
1913/2 = 2,8mm) zur Korrektur und
Ausformung einer konvexen Knochenkontur

МИНИ-долото OCHSENBEIN

("копыто")

Очень тонкое двухстороннее
костное долото в двух
вариантах ширины
(1913/1 = 1,8мм,
1913/2 = 2,8мм)
для коррекции и формирования
выпуклого контура кости

1031

Papillenheber

Instrument zur atraumatischen
Präparation unter Erhalt der
Papillen-anatomie

Элеватор для сосочков

Инструмент для atraumaticного
препарирования с сохранением
анатомии сосочка



1031
LS1032

1121

PAR Dissektor

Zur atraumatischen Darstellung
(Dissektion) einzelner
Gewebeschichten (z.B. in der
Weichgewebepreparation/
Bindegewebs-transplantat)


ПАР-диссектор (распатор)

для atraumaticного препарирования
(диссекции) отдельных слоев
ткани (напр., препарирование мягких
тканей/соединительнотканый
трансплантат)




1121

Рашпили Knochenseilen

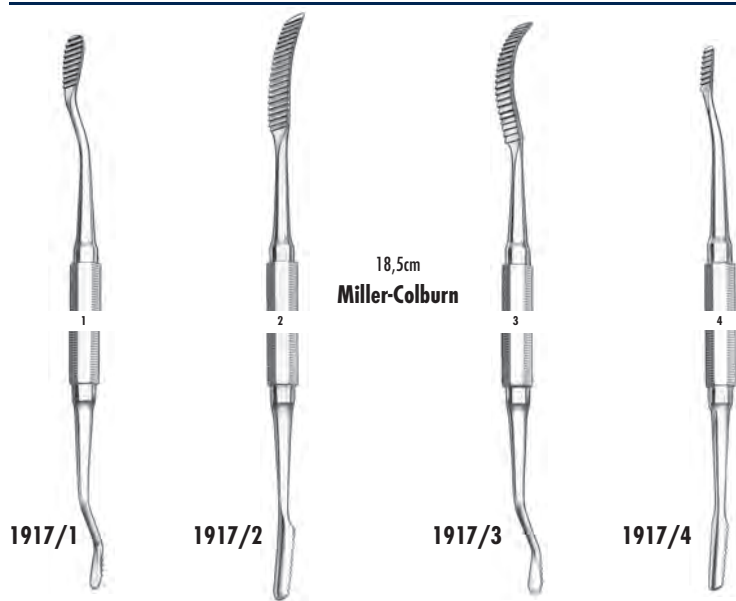

1956
1956-IT

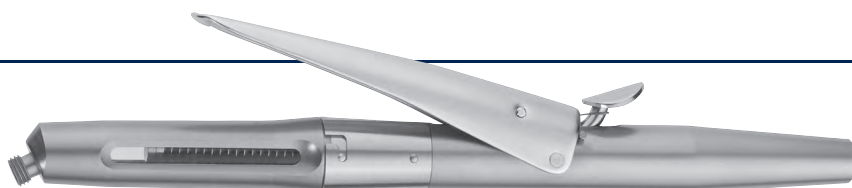

Шприц для интралигаментарной анестезии


- новый дизайн
- передовая технология
- изогнутая рабочая часть для легкого доступа в дистальную зону
- удобный в использовании двусторонний байонетный фиксатор – можно менять положение цилиндра при работе с верхней или нижней челюстью
- подходит для карпул объемом 1,8 мл
- снабжен предохранительной втулкой
- с каждым нажатием рычага впрыскивается 0,06 мл анестетика
- подходит для емкостной/термальной дезинфекции, а также для стерилизации в автоклаве при 135 C
- дальнейшая информация представлена в нашем буклете „Инструкция по эксплуатации“.

1956 = метрическая резьба
1956-IT = американская резьба
1956 = Metrisches Gewinde
1956-IT = US Gewinde

нижняя челюсть



верхняя челюсть

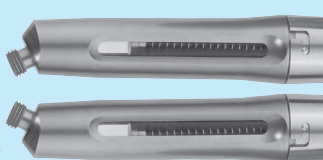

При повороте штыкового затвора можно менять положение цилиндра для работы с верхней или нижней челюстью.



Шприцы цилиндрические ампульные Zylinderampullenspritze

1950-RS

Zylinderampullenspritze ROSTFREI


- die ROSTFREIE Edelstahlspritze für die Leitungs- und Thermanalästhesie.
- Kein Anlaufen mehr, keine Chromabplatzungen!
- Bestens geeignet für die Aufbereitung auch im Thermodesinfektor und Sterilisator.

Цилиндрический ампульный шприц:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

- шприц из нерж.стали для проводниковой и местной анестезии
- без затеков, без растрескивания хрома!
- прекрасно переносит термическую дезинфекцию и стерилизацию.

komplett EDELSTAHL
полностью из нерж.стали

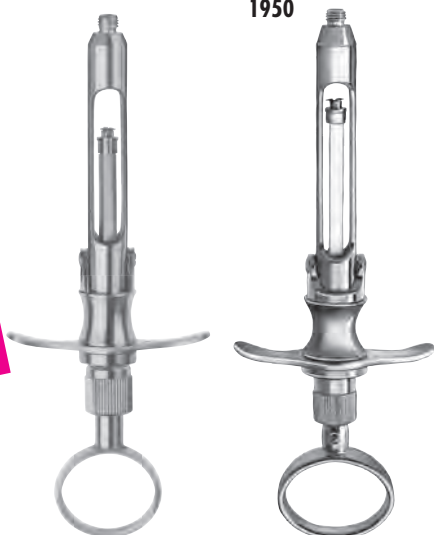

1950




1950 = латунь/ хромированный
1950 = Messing/ verchromt

Шприцы цилиндрические ампульные Zylinderampullenspritze

ME = метрическая резьба
IT = американская резьба
ME = Metrisches Gewinde
IT = US Gewinde

Все модели выполнены из латуни/хромированные

alle Modelle in Messing/ verchromt

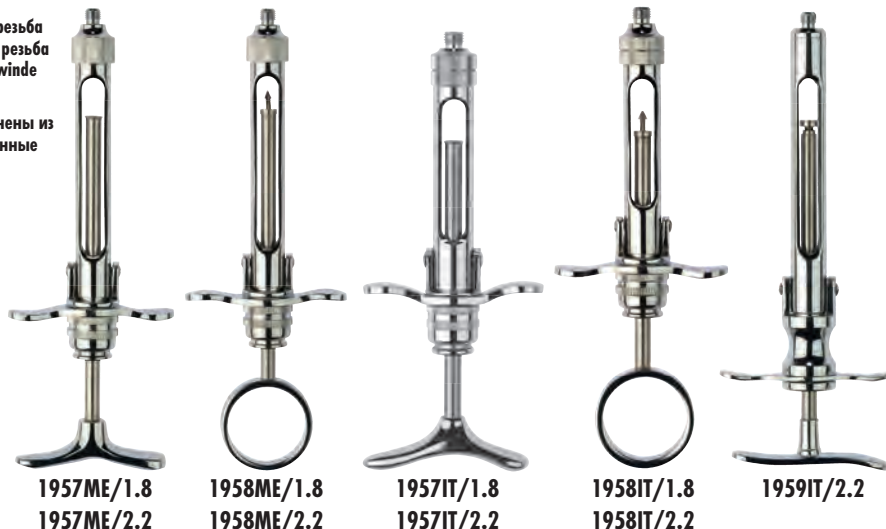

1957ME/1.8
1957ME/2.2

1958ME/1.8
1958ME/2.2

1957IT/1.8
1957IT/2.2

1958IT/1.8
1958IT/2.2

1959IT/2.2

1950K/1

Salbenkanüle
Packung à 12 Stück

Мазевая канюля
(напр., для Dantisolon)
Упаковка: 12 шт.

1950K/2

Salbenkanüle mit Olive
Packung à 12 Stück

Мазевая канюля с оливой
(напр., для Dantisolon)
Упаковка: 12 шт.

1950SP/1

Spritzenansatz
für Salbenspritzen

Запасная насадка
для мазевых шприцев



Штатив для шприца Sicherheitsständer

Sicherheitsständer SECURE

- Schwere, rostfreie Ausführung
- Zur sicheren Auf- und Entnahme der Spritze mit Injektionsnadeln während der Behandlung
- Hierdurch wird eine Verletzungs- und Kontaminierungsgefahr für Arzt und Patient vermindert
- No. 1074 ca. 200gr.
- No. 1075 ca. 300gr.
- Der SECURE Ständer No. 1075 ist zusätzlich mit einer Arretierung ausgestattet, so daß die Kanüle (Kanülideckel) selbstständig festge halten wird. Hierdurch ergibt sich ein Vorteil gegenüber der No. 1074, weil der Behandler beim Abziehen der Spritze den Kanülideckel nicht mehr festhalten muss. Darüberhinaus sorgt das wesentlich höhere Gewicht für eine noch bessere Standfestigkeit.

Штатив для шприца SECURE

- выполнен из тяжелой нержавеющей стали
- для безопасного содержания и извлечения шприца с инъекционной иглой во время лечения
- Помогает избежать повреждений и заражения врача и пациента
- № 1074 - 200 гр
- № 1075 - 300 гр
- Штатив SECURE № 1075 снабжен дополнительно удерживающим устройством, благодаря которому канюля (колпачок) стоит в штативе. Это является преимуществом перед № 1074, т.к. благодаря удерживающему устройству врачу не надо придерживать колпачок иглы рукой, вынимая шприц из штатива. При этом чем больше вес, тем лучше устойчивость.



1074

200gr.



1075

300gr.



Челюстно-лицевая хирургия Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

1597
15cm

Metallmeßstab

Металлическая мерная линейка



Слюноотсосы/щетки для очистки слюноотсоса Sauginstrumente/Reinigungsbürsten

mit Einkerbung am Arbeitsteil zur Vermeidung des vorschnellen Festsaugens
с зарубкой на рабочем конце, чтобы избежать преждевременной аспирации



Verpackungs-
einheit:
3 Stück

Стандартная
упаковка:
3 шт.

1965
23cm



Челюстно-лицевая хирургия

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

1898B/17.5
17,5cm

**Korn- und
Tupferzange**
mit Sperre,
fein, gebogen

**Зажим для
тупфера**
С блокировкой,
тонкий, изогнутый



1950K/3
Ø 1,0mm
LUER-LOCK

Spezial-Spülkanüle
für infizierte
Zahnfleischtaschen

Специальная канюля
для промывки
инфицированных
пародонтологических
карманов



1894MI/12.5
12,5cm

**Chirurgische
Mosquitoklemme
MICRO**

**Хирургический
зажим «MICRO»**



25

Челюстно-лицевая хирургия

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

1881
16,5cm

HARTMANN

Nasenspekulum

Носорасширитель



1817/17
17cm

KORKHAUS

**Draht- und
Ligaturenzange**

**Щипцы для
лигатурной
проволоки**



635
TOBOLD

Zungendrucker

**Шпатель для
языка**




869A/4.8
WEIL-BLAKESLEY

11cm

Siebbeinzange
140°

**Щипцы
назальные**
140°

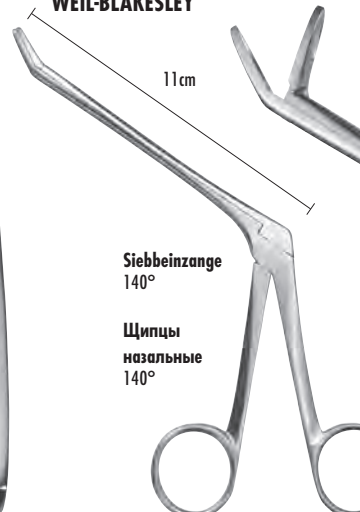

ОСТЕОТОМЫ для формирования ложа под имплантат

OSTEOTOME zur Ausformung des Implantatlagers

ОСТЕОТОМ

Костное долото

OSTEOTOM

Knochenmeißel

Широкая маркировка границы безопасной работы (от 10 мм).
Различная ширина инструмента.

ab 10mm große Markierung als Sicherheitszone
in verschiedenen Breiten erhältlich



Двусторонняя лазерная маркировка
doppelseitige Lasermarkierung

ОСТЕОТОМ

Конденсер кости

OSTEOTOM

Knochenstößel (Sinutom)

Lasermarkierung in 2mm Schritten
Лазерная маркировка каждые 2мм

ab 10mm große Markierung als Sicherheitszone
in verschiedenen Breiten erhältlich
zylindrisch, konkave und medium scharfe Arbeitsspitze

Широкая маркировка границы безопасной работы (от 10 мм).
Различная ширина инструмента.
Конусное, цилиндрическое, выпуклое рабочее основание.



Вогнутый и средний по остроте рабочий край.
konkaves und medium-scharfes Arbeitsende

ОСТЕОТОМ

Костный расширитель

OSTEOTOM

Knochenspreizer (Condenser)

Lasermarkierung in 2mm Schritten
Лазерная маркировка каждые 2 мм

ab 10mm große Markierung als Sicherheitszone,
in verschiedenen Breiten erhältlich
konisch zulaufend, konvexe Arbeitsspitze

С 10 мм широкая маркировка границы безопасной работы.
Инструмент предлагается различной ширины. Коническая
форма, выпуклый рабочий край.

Маркировка размеров
1-ый размер = размер рабочего основания
2-ой размер = через 10 мм

Größenmarkierung
1. Wert = an der Arbeitsspitze
2. Wert = nach 10mm




Выпуклый и плоский рабочий край.
konvexes und stumpfes Arbeitsende

ОСТЕОТОМ, костное долото OSTEOTOM, Knochenmeißel




- Прямые или изогнутые инструменты (прямые = для верхней челюсти, изогнутые = для нижней челюсти).
- Различная ширина от 3 до 8мм. Рекомендация для одиночных имплантатов: ширина до 4мм, для широкого альвеолярного края челюсти: ширина до 8мм.
- Маркировка глубины на долоте от 6мм до 10мм, (чёрная область = маркировка границы безопасной работы с 10мм).
- Рекомендация по использованию: мин. ширина альвеолярного края челюсти от 2-3мм. мин. высота кости от 10мм, макс. глубина расщепления кости до 70% от общей высоты кости.

ОСТЕОТОМ, Конденсер кости OSTEOTOM, Knochenstößel (Sinutom)

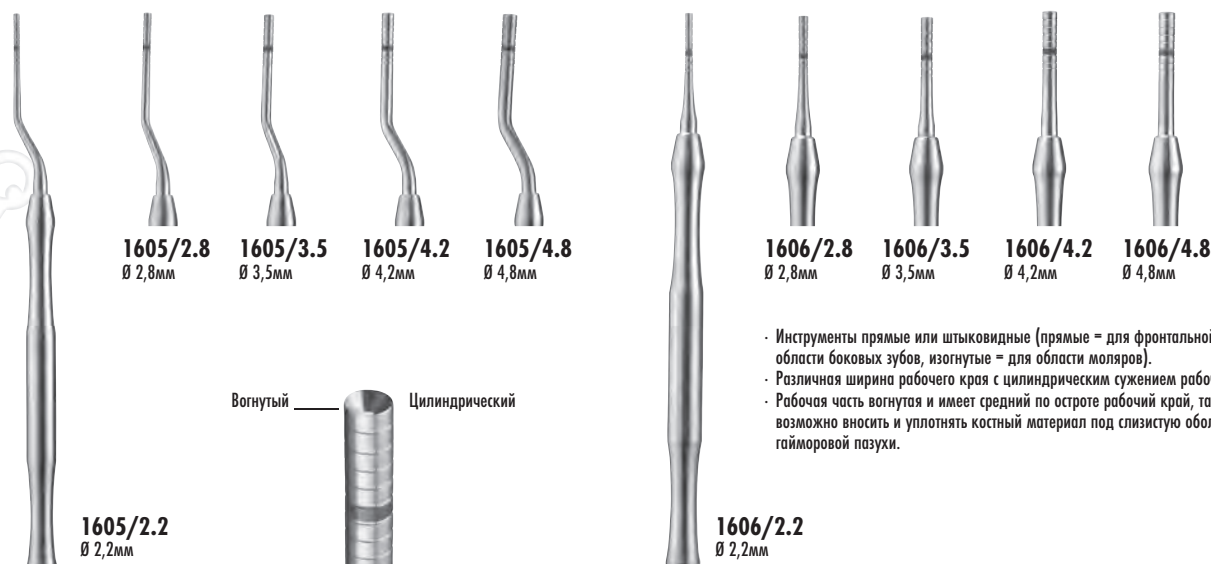

- Инструменты прямые или штыковидные (прямые = для фронтальной области и области боковых зубов, изогнутые = для области моляров).
- Различная ширина рабочего края с цилиндрическим сужением рабочего края.
- Рабочая часть вогнутая и имеет средний по остроте рабочий край, таким образом, возможно вносить и уплотнять костный материал под слизистую оболочку гайморовой пазухи.

ОСТЕОТОМ, костный расширитель OSTEOTOM, Knochenspreizer (Condenser)

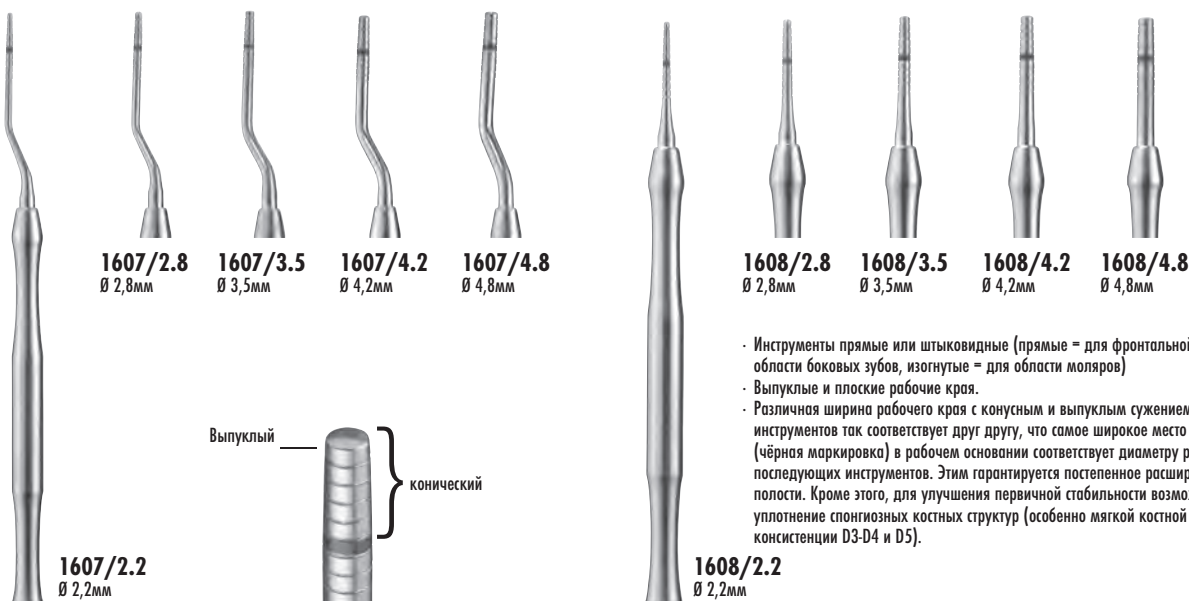

- Инструменты прямые или штыковидные (прямые = для фронтальной области и области боковых зубов, изогнутые = для области моляров)
- Выпуклые и плоские рабочие края.
- Различная ширина рабочего края с конусным и выпуклым сужением. Ширина инструментов так соответствует друг другу, что самое широкое место (чёрная маркировка) в рабочем основании соответствует диаметру рабочего края последующих инструментов. Этим гарантируется постепенное расширение костной полости. Кроме этого, для улучшения первичной стабильности возможно хорошее уплотнение спонгиозных костных структур (особенно мягкой костной ткани консистенции D3-D4 и D5).

ОСТЕОТОМ-НАБОР, Конденсер кости

OSTEOTOM-SET, Knochenstößel

1605-SET

Содержание/Inhalt:
1605/2,2, 2,8, 3,5, 4,2, 4,8
1606/2,2, 2,8, 3,5, 4,2, 4,8
3027

Конденсер кости Knochenstößel (Sinuotom)

Вогнутый
konkav



Цилиндрический
zylindrisch



ОСТЕОТОМ-НАБОР, костный расширитель

OSTEOTOM-SET, Knochenspreizer

1607-SET

Содержание/Inhalt:
1607/2,2, 2,8, 3,5, 4,2, 4,8
1608/2,2, 2,8, 3,5, 4,2, 4,8
3027

Костный расширитель Knochenspreizer (Condenser)

Выпуклый
konvex



конический
konisch



28

ОСТЕОТОМ-НАБОР, костное долото

OSTEOTOM-SET, Knochenmeißel

1609-SET

Содержание/Inhalt:
1609/3, 4, 6, 8,
1610/3, 6
3027

Костное долото Knochenmeißel



Двусторонняя лазерная маркировка
doppelseitige Lasermarkierung



Молоток имплантологический Hammer für Implantologie

1796
Mead



**Hammer für
implantologische**

Zwecke

n. MEAD mit sterilisierbaren
(Autoklav)Kunststoffbacken

**Молоток для
имплантологических**

целей

MEAD со стерилизуемыми
(в автоклаве) пластиковыми
щечками

1796A

Ersatzbacken,
1 Paar
сменные щечки,
1 пара



Хирургические пинцеты Chirurgische Pinzetten

785TC/12
12cm
Adson



TC = Hartmetall
твердый сплав
карбид вольфрама



anatomische Pinzette mit TC

n. ADSON
mit Hartmetalleinlagen (TC), zum
atraumatischen Abhalten/Halten
dünner Gewebelappen oder zum
sicheren Festhalten von Membranen
beim Zugschnitt

**Анатомический пинцет TC
ADSON**


с твердосплавными вставками для
atraumatischen захвата тонких лоскутков
ткани или для удерживания мембраны
при разрезе

Слепочные ложки Abdrucklöffel



IMPLAVISION – ein Implantat-Abdrucklöffel mit abnehmbaren Einzelsegmenten

Die Pick-up-Abformung wird als die präziseste Methode für die Positionierung der Laborimplantate auf dem Arbeitsmodell angesehen. Einige Implantat-Hersteller bieten jedoch keine geschlossene Abformung an, was die Herstellung eines individuellen Abformlöffels notwendig macht. Dies bedeutet einen enormen Kosten- und Zeitaufwand und eine erneute Einbestellung des Patienten. Speziell aufgrund dieser Problematik wurde der Abdrucklöffel IMPLAVISION entwickelt mit dem sich perfekte Arbeitsmodelle in einer einzigen Sitzung herstellen lassen. Das Resultat ist ein Abdrucklöffel mit 9 herausnehmbaren Einzelsegmenten, die nur durch jeweils eine spezielle Schraube gesichert sind und sich einfach mit dem mitgelieferten Schraubendreher entfernen lassen. Das Einzelsegment wird dort entfernt, wo ein direkter Zugang zum Abformpfosten notwendig ist. Ist die Schraube des Pfostens gelöst, lässt sich der Abdrucklöffel aus dem Mund herausnehmen und die Pfosten sind im Abdruckmaterial perfekt verankert. - angepasst an die Pick-up Technik - mit 9 herausnehmbaren Einzelsegmenten - aus rostfreiem Edelstahl hergestellt - wiederverwendbar, sterilisierbar bis 200°C (398°F) - extrem stabil, für Abdrücke von höchster Präzision - zahlreiche Retentionen zum Festhalten des Abformmaterials - geschützt durch internationales Patent

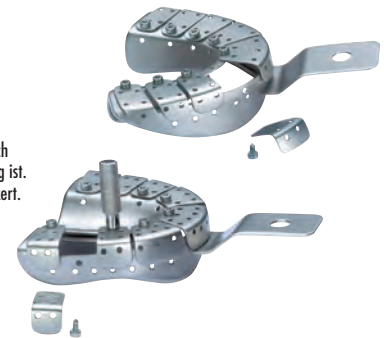

29


IMPLAVISION – слепочная ложка для имплантатов, со съёмными сегментами

Разъемный слепок считается самым точным методом позиционирования лабораторных имплантатов на рабочей модели. Однако, некоторые производители имплантатов не предлагают закрытые слепки, что ведет к необходимости изготовления индивидуальной слепочной ложки. Это означает существенное увеличение стоимости и времени и необходимость повторного вызова пациента. Такая проблематика привела к изобретению слепочной ложки IMPLAVISION, с помощью которой рабочая модель отличного качества изготавливается за одно посещение. Результат: слепочная ложка с 9 отдельными съёмными сегментами, каждый из них фиксируется одним винтом и легко снимается отверткой, прилагаемой к комплекту. Отдельный сегмент снимается там, где необходим прямой доступ к слепочному штифту. Когда винт снят со штифта, слепочная ложка извлекается из рта, и штифты остаются надежно зафиксированными в слепочном материале. - Пригодна для разборной техники - 9 отдельных съёмных сегментов - изготовлена из высококачественной нержавеющей стали - многократного применения, стерилизуется при 200 градусах C (398 F) - чрезвычайно устойчива, для слепков высочайшей точности - множество ретенций для удерживания слепочного материала - защищена международным патентом

Слепочные ложки Abdrucklöffel

Oberkiefer/верхняя челюсть

Unterkiefer/нижняя челюсть

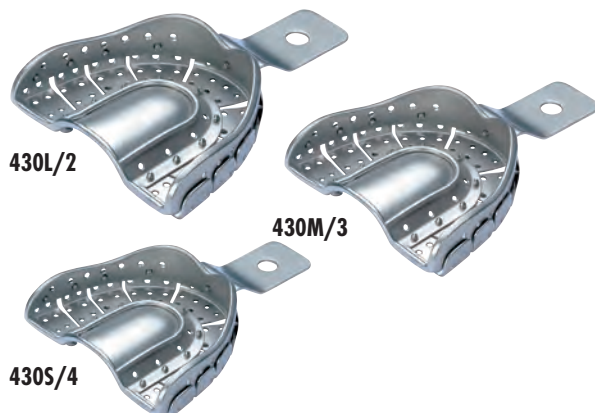

Ersatzschraube
запасной винт



REP431

Schraubenschlüssel
ключ для винта



REP430

Титановые кюреты Titanküretten Мельница костная Knochenmühle

IMPLANTAT Reinigungskürette- und Scaler

- als Scaler Fig. H6-H7 oder Kürette Fig. 4R-4L erhältlich
- autoklavierbar

Кюрета и скалер для чистки имплантата

- в качестве скалеров: рис. H6-H7, в качестве кюреток: рис. 4R-4L
- возможна стерилизация в автоклаве



LSTI972/H6-H7

LSTI960/4R-4L

Кноchenmühle, rostfrei mit TITAN Mahlwerk

- die TITAN Backen sind austauschbar
- hohe Stabilität und leichte Handhabung
- müheleses Reinigen möglich
- autoklavierbar



1924

Костная мельница, нержавеющей сталь, с ТИТАНОВОЙ дробильной установкой

- ТИТАНОВЫЕ щетки сменные
- высокая стабильность и простота пользования
- чистка не требует усилий
- возможна стерилизация в автоклаве

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Implantologie



TITAN Knochenmischdose

- für längere Knochenstücke
- komplett aus TITAN gefertigt, wodurch bei der Augmentation des Knochenmaterials eine optimale Gewebeverträglichkeit (biokompatibel) gewährleistet ist.

ТИТАН Костная центрифуга

- для более длинной костной стружки
- полностью титановая, поэтому при аугментации костным материалом обеспечивается оптимальная биосовместимость тканей



1923

1921

Кноchenmischdose

- rostfrei
- Innenfläche hochglanzpoliert
- autoklavierbar

Костный миксер

- нержавеющая сталь
- полировка внутренней поверхности
- возможна стерилизация в автоклаве

Hammer n. Ombredanne für Knochenmischdose

rostfrei, Gewicht: 720g, autoklavierbar

Молоток от Ombredanne для костной центрифуги нержавеющей сталь, вес 720 гр. возможна стерилизация в автоклаве



1795
25cm

Ombredanne

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Implantologie

Osteometer - Messzange zur Kieferkammweitenmessung, Skala beidseitig, rostfrei und autoklavierbar

Остеометр - щипцы для измерения ширины альвеолярного гребня, двухсторонняя шкала, нержавеющая сталь, возможна стерилизация в автоклаве.



1922

Инструмент для внесения костного материала.

- С помощью рабочей поверхности в форме ложки быстро и надёжно костный материал извлекается из ёмкости для замешивания костного материала. После этого материал наносится на соответствующее место.
- Широкая и плоская рабочая поверхность используется для придавливания и уплотнения костного материала.

Instrument zum Einbringen von Knochenmaterial

- Mit dem Löffel kann das Knochenmaterial der Knochenmischdose schnell und sicher entnommen werden. Danach wird an entsprechender Stelle appliziert.
- Das breite und plane Stopferteil (No. 1601) dient zum Eindrücken und Verdichten des Knochenmaterials



1601

LS1602



LS1920/1
gerade
прямой




LS1920A/1
abgewinkelt
угловой



Ersatzklinge
Запасное лезвие

LS1920/2 gerade/прямые
LS1920A/2 gebogen/изогнутые

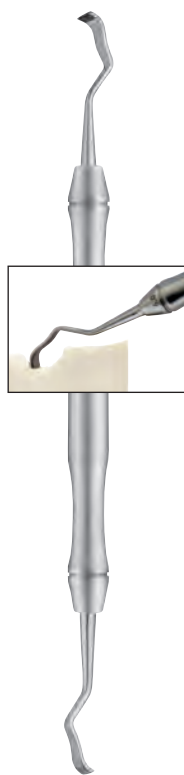

LS1915/4-6

Knochenschaber
6mm + 4mm breite Schaber Klinge
Костный скребок
6мм+4мм (ширина лезвия скребка)

Knochenschaber zur Gewinnung von autologen Knochentransplantaten

- dient zur schnellen und einfachen Gewinnung von autologen Knochenmaterials
- die Klinge ermöglicht die Gewinnung von kortikalen und spongiosen Knochens
- der gewonnene Knochen wird in der Kammer gesammelt und mit Blut vermischt
- auf Hilfsinstrumente wie Knochenfilter, Trepanbohrer oder Sägen kann im Normalfall verzichtet werden
- ergonomisch perfektes Design
- voll autoklavierbar mit auswechselbarer Schaber Klinge

Скребок костный для получения аутогенного костного трансплантата

- для быстрого и простого получения аутологичного костного материала
- лезвие обеспечивает сбор как кортикальной, так и губчатой кости
- полученная кость собирается в камеру и смешивается с кровью
- используется без вспомогательных инструментов типа костного фильтра, трепана или пилы
- прекрасная эргономичная форма
- полностью стерилизуется в автоклаве вместе со сменным лезвием

Инструменты для синус-лифтинга

Sinus-Lift Instrumente

- Sinuslift(ing): Bezeichnung für eine Augmentationsmethode im unmittelbaren Bereich unterhalb der Kieferhöhle bei einem zurückgebildeten (atrophischen) Oberkiefer. Beim Sinuslift wird zunächst die Schneidersche Membran vom Knochen abgelöst und in den entstandenen Hohlraum autologer Knochen eingebracht
- Die Instrumente 1142/1 + 2 dienen zur Ablösung der Kieferhöhlenschleimhaut und gleichzeitiger Verschiebung nach cranio-medial in die Kieferhöhle
- Das Instrument 1142/3 ist durch seine spezielle Formgebung zur Einbringung des Knochenersatzmaterials geeignet

- Синус-лифтинг: так называют метод аугментации в зоне непосредственно под гайморовой пазухой в случае атрофии верхней челюсти
- Инструменты 1142/1 + 2 служат для отделения и одновременного перемещения слизистой оболочки гайморовой пазухи в кранио-медиальном направлении
- Инструмент 1142/3 имеет специально разработанную форму для внесения аугментационного материала

1142/1
LS1142/1

1142/2
LS1142/2

1142/3
LS1142/3

Elevatoren – einfacher Winkel
Элеваторы – простой угол



LS1650/1 LS1650/2 LS1650/3 LS1650/4

Elevatoren – doppelter Winkel
Элеваторы – двойной угол



LS1650/5 LS1650/6 LS1650/7

Applikatoren – chirurgisch
Хирургические аппликаторы



LS1650/8 LS1650/9 LS1650/10